

MAKE THE
WORLD SEE

Milestone Systems

XProtect® Web Client 2021 R1

Brugermanual



Indholdsfortegnelse

Copyright, varemærker og ansvarsfraskrivelse	4
Oversigt	5
XProtect Web Client	5
Krav og overvejelser	6
Krav for at lytte til modtaget lyd	6
Krav til brug af tryk-for-at-tale	6
Krav til direkte streaming	7
Konfiguration	8
Indstillinger	8
Direkte streaming (forklaret)	9
Tilpasset streaming (forklaret)	9
Administrer kameraoptagelser (forklaret)	10
Opbevaringstid og lagring af optagelser og efterforskninger (forklaret)	11
Lyt til modtaget lyd (forklaret)	12
Tryk-for-at-tale (forklaret)	12
Digital zoom eller optisk zoom (forklaret)	13
Drift	15
Logge på	15
Oversigt over startside	17
Søg efter kamera	18
Naviger til kamera	19
Se live video (forklaret)	20
Lyt til modtaget lyd i live video	22
Brug tryk-for-at-tale i live video fra et kamera	23
Broadcast lyd til flere kameraer i live video	24
Afspil optagelser fra et kamera	24
Afspil lyd i videooptagelser (forklaret)	27
Optagelser fra flere kameraer (forklaret)	28

Angiv tidspunkt for videoafspilning	30
Slå afspilning til eller fra	32
Fjern unødvendige kameraer fra videoafspilning	33
Kameraer i dit efterforskningsområde (forklaret)	33
Brug efterforskningstidslinjen (forklaret)	34
Opret efterforskninger fra et eller flere kameraer	35
Føj et kamera til en eksisterende efterforskning	37
Fjern et kamera fra eksisterende efterforskning	39
Opdater eller slet din efterforskning	40
Forbered eksport og download af video	41
Del en XProtect Web Client-side (forklaret)	43
Se alarmer	44
Aktiver handlinger	45
PTZ-styring	46
Brug digital zoom	47
Brug optisk zoom (for kameraer, der understøtter optisk zoom)	48
Opgrader	49
Opdater XProtect Web Client	49

Copyright, varemærker og ansvarsfraskrivelse

Copyright © 2021 Milestone Systems A/S

Varemærker

XProtect er et registreret varemærke tilhørende Milestone Systems A/S.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Alle øvrige varemærker, der er nævnt i dette dokument, er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Ansvarsfraskrivelse

Denne tekst er kun beregnet som generel information og er udarbejdet i god tro.

Brug af informationen heri er i enhver henseende på brugerens egen risiko, og intet heri kan fortolkes til at udgøre nogen form for garanti.

Milestone Systems A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Alle navne på personer og organisationer, der benyttes som eksempler i denne tekst, er fiktive. Enhver lighed med virkelige organisationer eller personer, levende eller døde, er rent tilfældigt og helt utilsigtet.

Dette produkt kan gøre brug af software fra tredjeparter, hvortil der kan gælde særlige vilkår og betingelser. Hvis dette er tilfældet, kan du finde flere oplysninger i filen `3rd_party_software_terms_and_conditions.txt`, som er placeret i installationsmappen til Milestone-overvågningssystemet.

Oversigt

XProtect Web Client

Brug XProtect Web Client til at:

- Se live video og videooptagelser i din webbrowser
- Afspille modtaget og udgående lyd i live video og videooptagelser
 - Bruge funktionen tryk-for-at-tale (PTT - push-to-talk) mens du ser live video fra et kamera
 - Broadcaste lyd til flere kameraer i live-tilstand
 - Afspille modtaget og udgående lyd i afspilningstilstand
- Oprette efterforskninger
- Downlade videoeksporter med eller uden modtaget og udgående optaget lyd
- Aktivere handlinger, som udløser hændelser i dit videoovervågningssystem
- Se videoer for alarmer, der bliver udløst af forskellige hændelser.

Krav og overvejelser

Krav for at lytte til modtaget lyd

For at lytte til modtaget lyd fra dine kameraer skal du have:

- En mikrofon tilknyttet et kamera



Når et kamera i dit overvågningssystem har en mikrofon tilsluttet, kan du afspille lyd uden yderligere indstillinger. Lyd-ikonet på kameraets værktøjslinje viser om lyd-funktionen er tilgængelig.

- Tilstrækkelige brugerrettigheder



Adgang til funktionen til modtaget lyd kan være begrænset afhængig af dine brugerrettigheder. Kontakt din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

Krav til brug af tryk-for-at-tale

For at bruge funktionen tryk-for-at-tale (PTT) i dit VMS-system skal du have:

- Kameraer der har højttalere tilknyttet
- Mikofoner, der er tilknyttet din computer



Du skal give din internetbrowser adgang til din PC-mikrofon.

- Tilstrækkelige brugerrettigheder



Adgang til funktionen tryk-for-at-tale (PTT) kan være begrænset på grund af dine brugerrettigheder. Kontakt din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

- Sikker internet-forbindelse (HTTPS)



Funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er ikke understøttet i Internet Explorer 11.

Krav til direkte streaming

XProtect Web Client understøtter direkte streaming i live-tilstand (kun for XProtect Expert og XProtect Corporate).

Du kan bruge direkte streaming til at overvåge mere end 100 samtidige live video streams i fuld HD 30 FPS. For at bruge denne funktion skal du gøre følgende:

- Brug kameraer, der understøtter H.264-codec
- Aktiver funktionen med direkte streaming i XProtect Web Client (se [Indstillinger på side 8](#))
-

For yderligere oplysninger, se [administratormanualen for XProtect VMS](#).


Konfiguration

Indstillinger




"Hvordan sikrer jeg, at XProtect Web Client kører så glat som muligt? Jeg vil også gerne kunne bevæge PTZ-kameraer på en anden måde."

På fanen **Indstillinger**:

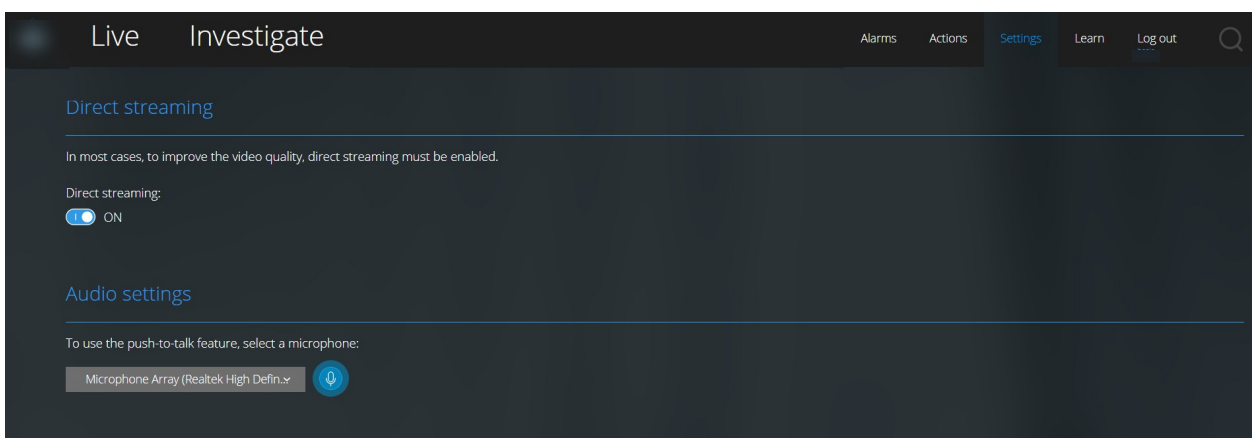

- **Direkte streaming** - aktiver funktionen for direkte streaming (kun for XProtect Expert og XProtect Corporate). Funktionen er som standard aktiveret (se [Direkte streaming \(forklaret\) på side 9](#))
- **Indstillinger for lyd** - vælg den mikrofon, som XProtect Web Client vil bruge til funktionen tryk-for-at-tale (PTT). Et blinkende tryk-for-at-tale-ikon betyder, at den tilknyttede lydenhed er klar til brug

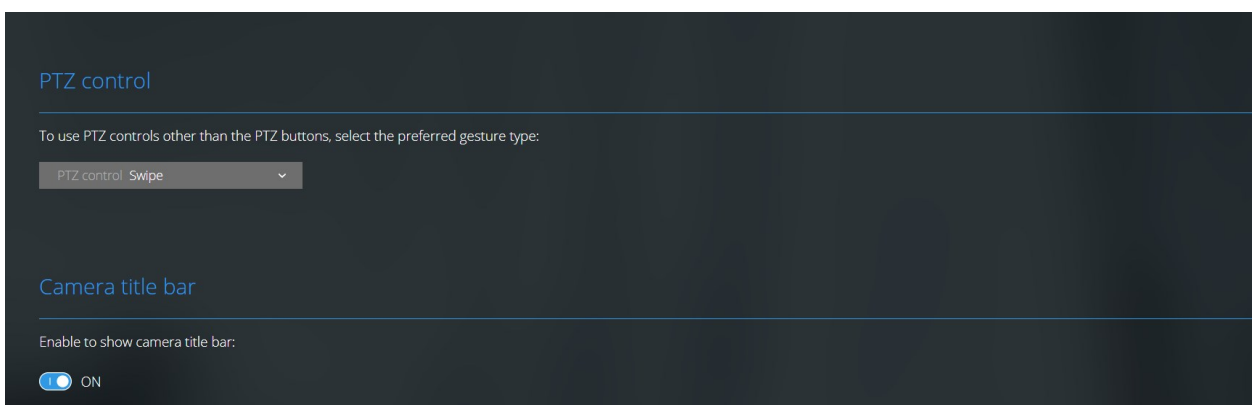

- **PTZ-styring** - vælg den foretrukne bevægelse til PTZ-styring, når PTZ-knapperne ikke er aktive (se [PTZ-styring på side 46](#))
- **Kamera-titellinje** - aktiver denne indstilling for at vise titellinjen for dine kameraer
- Under **Overlejring til videodiagnosticering** kan du aktivere denne indstilling til at se billedhastighed (FPS/billeder pr. sekund), codec samt opløsningen og typen af videostreamen i den valgte visning. Denne feature viser informationen som en overlejring til videoen og hjælpe med til at fejlfinde XProtect Web Client-problemer, som er forbundet til videostreamen og lokale problemer med ydelsen
- **Brugsdata** - aktiver denne indstilling for stille brugsdata til rådighed. Du kan se en fuld liste over de indsamlede brugsdata i linket med teksten **Politik om personlige oplysninger**

Du må ikke aktivere dataindsamling, hvis dit system skal have en installation, der overholder EUs GDPR. For yderligere oplysninger, se [Vejledning til GDPR-privatlivsbeskyttelse](#).

Direkte streaming (forklaret)

XProtect Mobile understøtter direkte streaming i live-tilstand (kun for XProtect Expert og XProtect Corporate).

Direkte streaming er en videostreaming-teknologi, der overfører video fra et XProtect-system til klienterne direkte i H.264 codec, som er understøttet af de fleste moderne IP-kameraer. Direkte streaming kræver ikke nogen transkodning og fjerner derfor noget af presset på XProtect-systemet.

Direkte streaming-teknologi står i modsætning til indstillingen transkodning XProtect, hvor et XProtect-system dekoder video fra det codec, der bliver på kameraet, til JPEG-filer. Aktivering af funktionen fører til mindre CPU-belastning for den samme konfiguration af kameraer og videostreams. Direkte streaming forbedrer også streaming-ydelsen for den samme hardware – op til fem gange så mange samtidige videostreams sammenlignet med transkodning.

I XProtect Web Client kan du bruge direkte streaming i både enkeltkamera-visningen og i gittervisningen.

Videostreamen går tilbage fra direkte streaming til transkodning når:

- Funktionen med direkte streaming er blevet deaktiveret i Management Client eller også er kravene ikke blevet opfyldt (se [Krav til direkte streaming på side 7](#))
- Codec fra kameraet, der streamer, ikke er H.264
- Videoen ikke går i gang med at spille i mere end ti sekunder
- Billedhastigheden på det kamera, der streamer, er sat til **et** billede pr. sekund (1 FPS)
- Forbindelsen med serveren eller med kameraet er mistet
- Du bruger funktionen til beskyttelse af privatområder til live video

Tilpasset streaming (forklaret)

XProtect Mobile understøtter tilpasset streaming i live-tilstand (kun for XProtect Expert og XProtect Corporate).

Tilpasset streaming kan være nyttigt, hvis du ser flere live videostreams i den samme kameravisning. Funktionen optimerer XProtect Mobile-serverens ydelse og forbedrer dekodningskapaciteten og ydelsen for enheder, der kører XProtect Mobile-klienten og XProtect Web Client.

For at kunne udnytte tilpasset streaming skal dine kameraer have flere streams med forskellige opløsninger defineret. I dette tilfælde giver funktionen dig mulighed for at:

- Optimere videokvalitet - vælger den stream med den lavest tilgængelige opløsning, der er den samme som eller højere end den anmodede opløsning
- Optimere serverydelse - nedsætter den ønskede opløsning og vælger så den stream med den lavest tilgængelige opløsning, der er den samme som eller højere end den nedsatte anmodning
- Optimere opløsning til lav båndbredde - vælger den stream med den lavest tilgængelige opløsning (anbefalet hvis du bruger 3G eller et ustabil netværk)



Mens der bliver zoomet, er den live videostream, der bliver anmodet om, altid den med den højeste tilgængelige opløsning.



Båndbreddeforbruget bliver ofte mindre, når opløsningen på de anmodede streams bliver reduceret. Båndbreddeforbruget afhænger også af andre indstillinger i konfigurationerne af de definerede streams.

For yderligere oplysninger, se [administratormanualen for XProtect VMS](#).

Administrer kameraoptagelser (forklaret)

Du kan administrere dine video- og lydoptagelser fra kameraer på følgende måder:

- På **Live** -fanen kan du:
 - Afspille en optagelse fra et bestemt kamera
 - Afspil modtaget og udgående lyd i video-optagelser eller efterforskninger (se [Afspil lyd i videooptagelser \(forklaret\) på side 27](#))
 - Angive tidspunktet for den optagelse, du ønsker at afspille. Det angivne tidspunkt gælder for det kamera, du har valgt

- På fanen **Efterforsk** kan du:
 - Afspille eller efterforske optagelser fra et eller flere kameraer



I efterforskningstilstand kan du, når du ønsker at afspille optagelser uden at oprette en efterforskning, altid afspille optagelser fra alle kameraer i den aktuelle visning på samme tid.

- Afspil modtaget og udgående lyd i videooptagelser eller efterforskninger
- Angiv tidspunktet for de optagelser, du ønsker at afspille eller efterforske. Det angivne tidspunkt gælder for alle kameraer, der er med i den angivne visning eller er føjet til din efterforskning
- Du kan angive et tidsinterval for dine optagelser og konfigurere deres præcise start- og slutdato og -tidspunkt
- Du kan administrere dine gemte efterforskninger: opdatere deres tilstand, redigere deres konfiguration ved at tilføje eller fjerne kameraer, slette efterforskninger eller eksportere og downloade videooptagelser



For at sikre at optagelserne bliver gemt så længe, som du har brug for dem, skal du indstille opbevaringstiden, så det passer til dine behov (se [Opbevaringstid og lagring af optagelser og efterforskninger \(forklaret\)](#) på side 11).

Opbevaringstid og lagring af optagelser og efterforskninger (forklaret)

Opbevaringstiden for video-optagelser er en indstilling i XProtect Management Client, og den definerer, hvor længe optagelserne bliver gemt i systemets database. Som standard er opbevaringsperioden syv dage. Hvis du ønsker at ændre opbevaringstiden eller den maksimale størrelse af databasen, skal du kontakte din systemadministrator. Når opbevaringstiden udløber, slettes optagelserne.

På fanerne **Live** og **Efterforsk** kan du afspille videooptagelser, der ikke er ældre end antallet af dage, der er defineret i indstillingen for opbevaringstid.

Hvis du vil forhindre, at dine optagelser bliver slettet, skal du oprette en efterforskning på fanen **Efterforsk**. Når du opretter denne efterforskning, kan du afspille, eksportere og downloade videoerne, selv om optagelserne er blevet slettet fra systemets database.

I XProtect Management Client kan systemadministratoren også aktivere en indstilling for opbevaringstiden for efterforskninger, som definerer, hvor længe efterforskninger bliver gemt på mobilserveren. Som standard er opbevaringsperioden syv dage. Når du aktiverer denne indstilling, slettes alle efterforskninger, som er blevet oprettet tidligere end den periode, opbevaringstiden dækker.

For at sikre dig mod, at dine efterforskninger bliver slettet, kan du forberede videoeksporter og downloade efterforskningerne på din computer.

Lyt til modtaget lyd (forklaret)

XProtect Web Client understøtter modtaget lyd, når du:

- Se live video (se [Se live video \(forklaret\)](#) på side 20)
- Afspil video-optagelser (se [Administrer kameraoptagelser \(forklaret\)](#) på side 10)

Modtaget lyd er også tilgængelig i:

- Efterforskninger (se [Kameraer i dit efterforskningsområde \(forklaret\)](#) på side 33)
- Videoeksporter (se [Forbered eksport og download af video på side 41](#))
- Alarmer (se [Se alarmer på side 44](#))
- Handlinger (se [Aktiver handlinger på side 45](#))

Tryk-for-at-tale (forklaret)

Med funktionen tryk-for-at-tale kan du via VMS-systemet kommunikere fra en PC-mikrofon med folk tæt på et kamera, eller du kan broadcaste lyd til flere videokameraer med lydudstyr. Du kan også lytte til optagede samtaler i afspilningstilstand eller inkludere den optagede tovejslyd i lydpakken, når du forbereder videoeksporter.





XProtect Web Client understøtter funktionen tryk-for-at-tale (PTT, push-to-talk):

- Når du ser live video fra et kamera eller flere kameraer (se [Se live video \(forklaret\)](#) på side 20)
- Når du afspiller den optagede udgående lyd i video-optagelser (se [Afspil lyd i videooptagelser \(forklaret\)](#) på side 27)
- I efterforskninger og videoeksporter
- I handlinger (se [Aktiver handlinger på side 45](#))
- I alarmer (se [Se alarmer på side 44](#))



Du skal give din internetbrowser adgang til dine PC-mikrofoner (se [Krav til brug af tryk-for-at-tale på side 6](#)).

Når funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig for brug, kan du se knappen **Tryk-for-at-tale** på kameraværktøjslinjen. Dens ikon har følgende statuser:

Ikon	Beskrivelse
 (Tilgængelig)	<p>I live-tilstand bliver det vist, at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, og at du opfylder de nødvendige krav for at bruge den. Klik og hold for at starte med at bruge tryk-for-at-tale. Frigiv knappen for at afslutte transmissionen af lyd.</p>
 (Aktiv)	<p>I live-tilstand bliver det vist, at du aktuelt bruger funktionen tryk-for-at-tale (PTT). PC-mikrofonen og højttaleren på videokameraet er i aktiv tilstand. Den blå pulserende cirkel viser lydniveauet.</p>
 (Deaktiveret)	<p>I live tilstand viser den at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, men du opfylder ikke de nødvendige krav for at bruge den (se Krav til brug af tryk-for-at-tale på side 6) • Kameraets højttaler er deaktiveret • Hardware-enheden er deaktiveret
	<p>Viser i afspilningstilstand at du kan lytte til tovejslyd mens du afspiller en video-optagelse, og at du kan vælge den lydkilde, du ønsker at høre (se Afspil lyd i videooptagelser (forklaret) på side 27).</p>

Regler for at afbryde tryk-for-at-tale i live tilstand

Baseret på niveauet af dine brugerrettigheder (Administrators eller Operators) er der to regler for at afbryde tryk-for-at-tale-sessioner i live tilstand:

- Brugere med det samme niveau af brugerrettigheder kan ikke afbryde hinanden
- Brugere med et lavere niveau af brugerrettigheder (Operators) kan ikke afbryde brugere med et højere niveau af brugerrettigheder (Administrators)

Digital zoom eller optisk zoom (forklaret)

Når du bruger den digitale zoom:


- Billedkvaliteten bliver lavere. Det, du ser, er pixeleret og mindre tydeligt
- Optagelseskvaliteten ændrer sig ikke
- Zoom-niveauet i optagelsen ændrer sig ikke

Når du bruger den optiske zoom (kun for kameraer, som understøtter optisk zoom):

- Billedkvaliteten, du ser, ændrer sig ikke
- Optagelseskvaliteten ændrer sig ikke
- Hvis du bruger optisk zoom på dit kamera under optagelse, så vil de anvendte zoom-niveauer blive afspejlet i din optagelse

Drift

Logge på

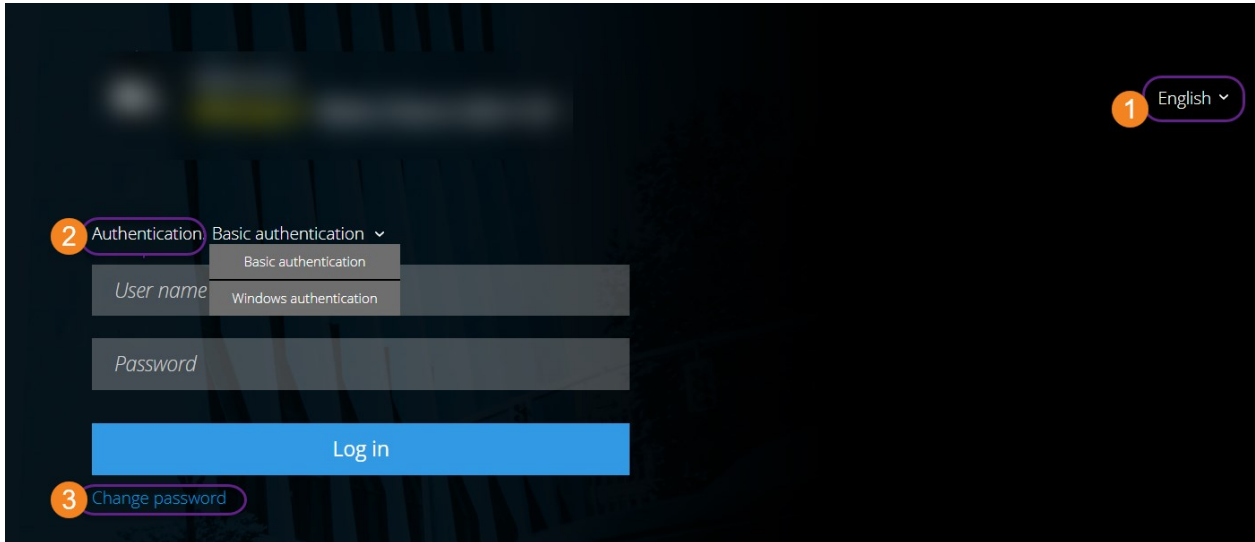

Logon første gang



Milestone anbefaler, at du bruger en sikker forbindelse, når du administrerer dine brugeroplysninger.

1. I adresselinjen på din webbrowser skal du angive den internetadresse, du har fået af din systemadministrator. Eksempel: **http://11.2.3.4:8081** eller **https://11.2.3.4:8082**. Logon-siden åbner.
2. For at ændre sprog skal du klikke på standard-sproget **1** oppe til højre.

3. I listen **Godkendelse**  skal du vælge en af disse godkendelsesmetoder:

- **Basisgodkendelse** - Vælg denne for at logge på som basisbruger. Basisbrugere bliver defineret af din systemadministrator i XProtect Management Client. For at logge på som basisbruger skal du først ændre din midlertidige adgangskode:
 1. I felterne **Brugernavn** og **Adgangskode** skal du indtaste de logonoplysninger, du har fået af din systemadministrator.
 2. Klik **Logon**. Dialogboksen **Skift adgangskode** bliver vist.
 3. Klik **Fortsæt** for at åbne et nyt browser-vindue.
 4. Følg instruktionerne, som bliver vist i guiden **Indstil en ny adgangskode**, og gem din nye adgangskode.
 5. Når du har gemt dine ændringer skal du lukke det aktuelle browser-vindue og logge på XProtect Web Client med din nye adgangskode.



Hvis din systemadministrator tvinger dig til at ændre din adgangskode næste gang du logger på, skal du følge trinene ovenfor for at logge på.

- **Windows-godkendelse** - Vælg denne indstilling for at logge på med dine Windows-brugeroplysninger
 1. I felterne **Domæne\Brugernavn** og **Adgangskode** skal du indtaste dine Windows-brugeroplysninger.



Windows-brugerlegitimationsoplysninger gælder for en specifik maskine eller et domæne.

- Klik **Logon**.

Skift adgangskode



For at kunne administrere dine brugeroplysninger, skal du bruge XProtect VMS 2021 R1 eller senere.

Det forøger dit XProtect VMS-systems sikkerhed at skifte din adgangskode ofte. Hvis du vælger at logge på som basisbruger, kan du ændre din adgangskode, når som helst du ønsker. Vælger du derimod metoden Windows-godkendelse, er det kun din systemadministrator, der kan ændre din adgangskode.

For at ændre din adgangskode skal du gå til XProtect Web Clients logon-side:

1. I listen **Godkendelse** skal du vælge **Basisgodkendelse**.
2. Klik på linket **Skift adgangskode** ³ for at åbne et nyt browser-vindue.
3. Følg instruktionerne i guiden **Indstil en ny adgangskode** og gem din nye adgangskode.
4. Når du har gemt dine ændringer skal du lukke det aktuelle browser-vindue og logge på XProtect Web Client med din nye adgangskode.




Hvis du har glemt din nuværende adgangskode, skal du kontakte din systemadministrator. Systemadministrator vil tvinge dig til at ændre din adgangskode næste gang du logger på.




Hvis du har foretaget mange mislykkede forsøg på at logge på, vil din konto blive spærret. Du kan enten vente på at spærringstiden udløber eller kontakte din systemadministrator. Administratoren kan genaktivere din konto, og kan desuden tvinge dig til at ændre din adgangskode næste gang du logger på.

Oversigt over startsiden

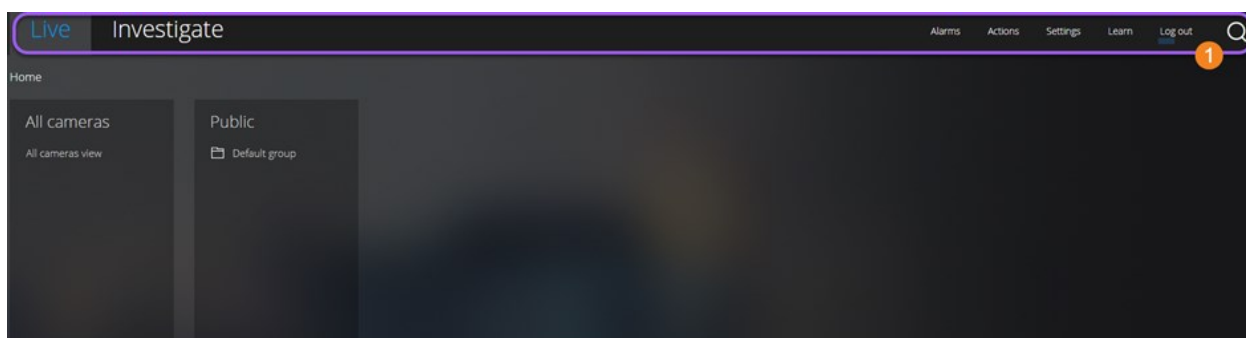


Element ¹ i menuen	Hvad kan det bruges til?
XProtect Web Client -logo	Klik for at komme tilbage til startskærmen for XProtect Web Client.
Live	<ul style="list-style-type: none"> • Klik for at komme tilbage til din sidste placering i visningsstrukturen

Element  i menuen	Hvad kan det bruges til?
	<ul style="list-style-type: none"> • Se live video (se Se live video (forklaret) på side 20) • Afspil optagelser fra et kamera (se Afspil optagelser fra et kamera på side 24)
Efterforsk	Afspil optagelser fra flere kameraer (se Optagelser fra flere kameraer (forklaret) på side 28 og Forbered eksport og download af video på side 41).
Alarmer	Se alarmer fra alle kameraer (se Se alarmer på side 44).
Handlinger	Aktiver handlinger, for eksempel at åbne døre (se Aktiver handlinger på side 45).
Indstillinger	Brugertilpasning af XProtect Web Client (se Indstillinger på side 8).
Lær mere	Se video-tutorials og læs mere om XProtect Web Client.
Log af	Afslut XProtect Web Client.
Søg	Find en mappe, en visning eller et kamera (se Søg efter kamera på side 18).

Søg efter kamera

På **Start** -siden:


1. Klik på  oppe til højre.
2. Start med at angive navnet på en mappe, en visning eller et kamera. Resultaterne vises i takt med at du angiver tekst.

- 3. Klik på et kamera for flere muligheder med live video (se [Se live video \(forklaret\)](#) på side 20).

✓ Angiv **ptz** for at finde alle dine PTZ-kameraer. Angiv **audio** for at finde alle de kameraer, der har mikrofoner tilsluttet. Angiv **ptt** for at finde alle dine kameraer med højttalere.

Naviger til kamera

På **Start** -siden:

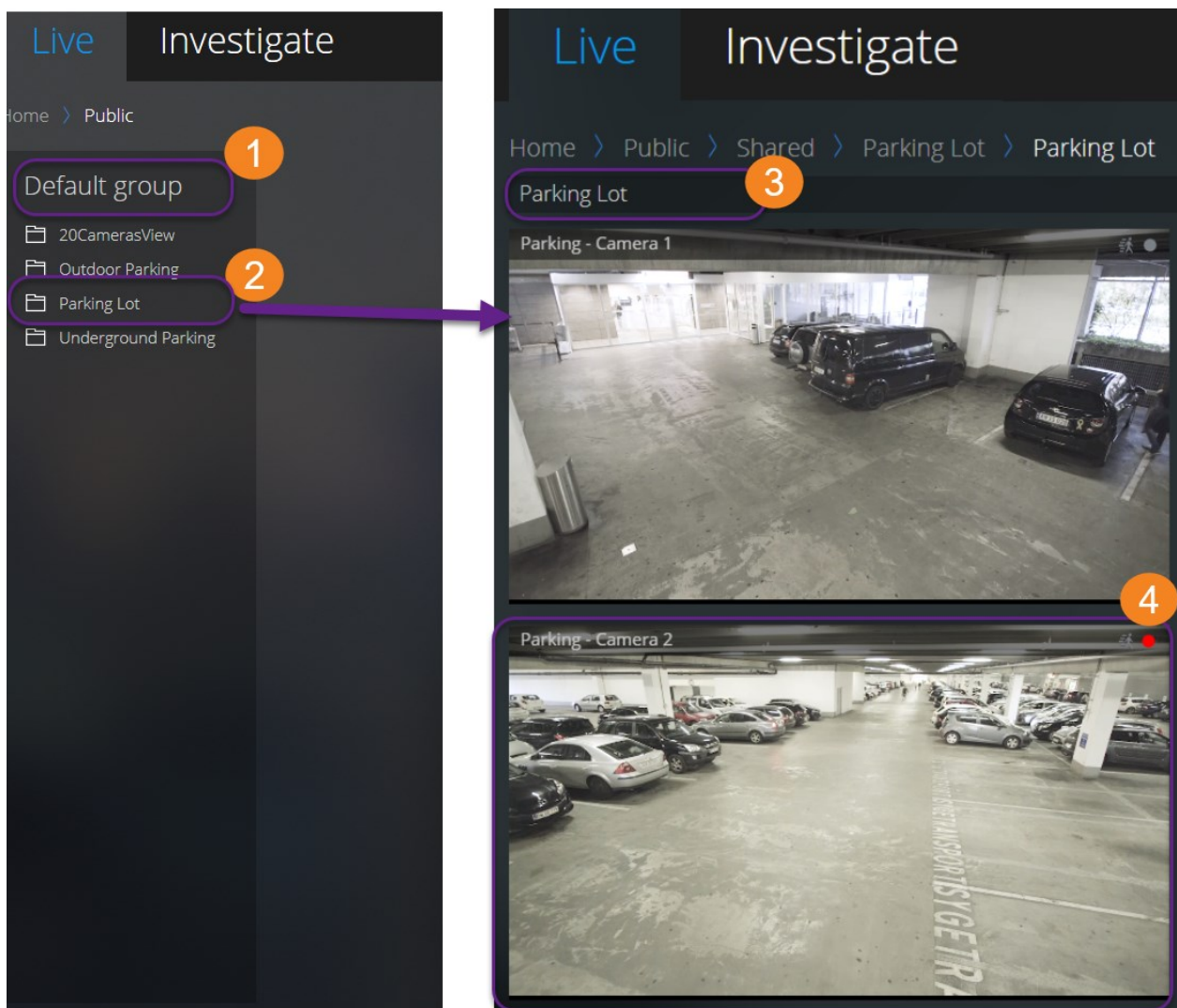

- 1. I en mappe 1 skal du klikke på en undermappe 2 for at se dine visninger 3.
- 2. I en visning 3 kan du se live video fra alle kameraer i visningen. Se hvilke kameraer, der har tilknyttet mikrofoner og højttalere.


- Klik på et kamera **4** for at afspille optagelser fra det kamera (se [Afspil optagelser fra et kamera på side 24](#)).

Se live video (forklaret)






"Hvad kan jeg gøre med live video? Og hvad er de røde og grønne cirkler oppe til højre i videoen?"

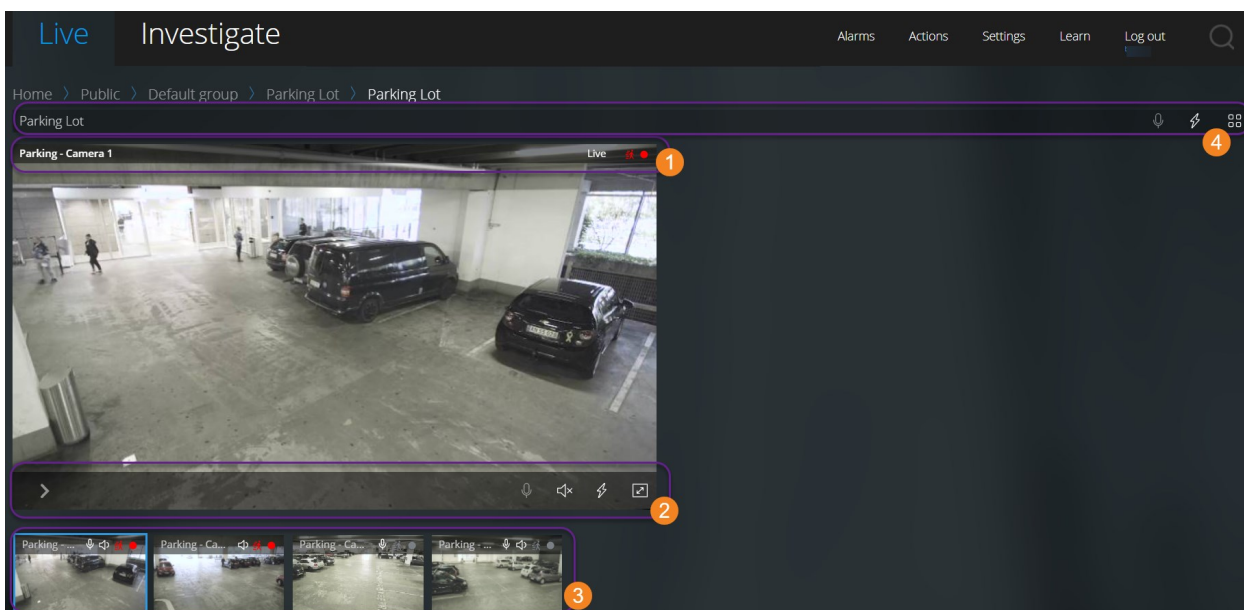På fanebladet Live skal du finde et kamera og klikke på det.










På kameraets titellinje **1**:

- Se kameraets navn
- Tjek om den video, du ser, er i live eller afspilningstilstand
- Kontroller om kameraet registrerer bevægelse, optager video eller begge dele.

Symbol	Bliver bevægelse registreret?	Bliver videoen optaget?
		


Symbol	Bliver bevægelse registreret?	Bliver videoen optaget?
	☑	⊗
	⊗	☑
	☑	☑




På kameraets værktøjslinje **2**:

Element	Hvad kan det bruges til?
	Sæt live video på pause og afspil optaget video (se Afspil optagelser fra et kamera på side 24).
	Flyt og zoom dit PTZ-kamera (Kun for PTZ-kameraer).
	Flyt dit PTZ-kamera til en PTZ-forudindstilling, som du har fastsat i XProtect Smart Client (Kun for PTZ-kameraer med forudindstillinger).
	Se alle handlinger til kameraet. Vælg og aktiver en handling.
	Gå til fuld skærm. Klik igen eller tryk Esc for at forlade fuld skærm.
	Start eller stop med at lytte til modtaget lyd (se Krav for at lytte til modtaget lyd på side 6).
	Klik og hold for at starte tryk-for-at-tale til et kamera. Slip ikonet for at afslutte transmissionen af lyd (se Krav til brug af tryk-for-at-tale på side 6).


På striben med miniaturebilleder **3**:

- Se live video fra alle kameraer i visningen
- Se hvilke af kameraerne, der har mikrofoner tilsluttet
- Se hvilke kameraer, der har højttalere
- Klik på et andet kamera for at skifte til det
- Du kan ændre på størrelsen af sriben med miniaturebilleder ved at flytte musen til sribens øverste kant og så trække den op eller ned.


På visningens værktøjslinje :

- Klik og hold  for at starte broadcasting af lyd til alle de kameraer i visningen, som har lydudstyr
- Klik på  for at se alle handlinger for alle kameraer i visningen. Vælg og aktiver en handling
- Klik på  for at se større live video fra alle kameraer i visningen.


Lyt til modtaget lyd i live video

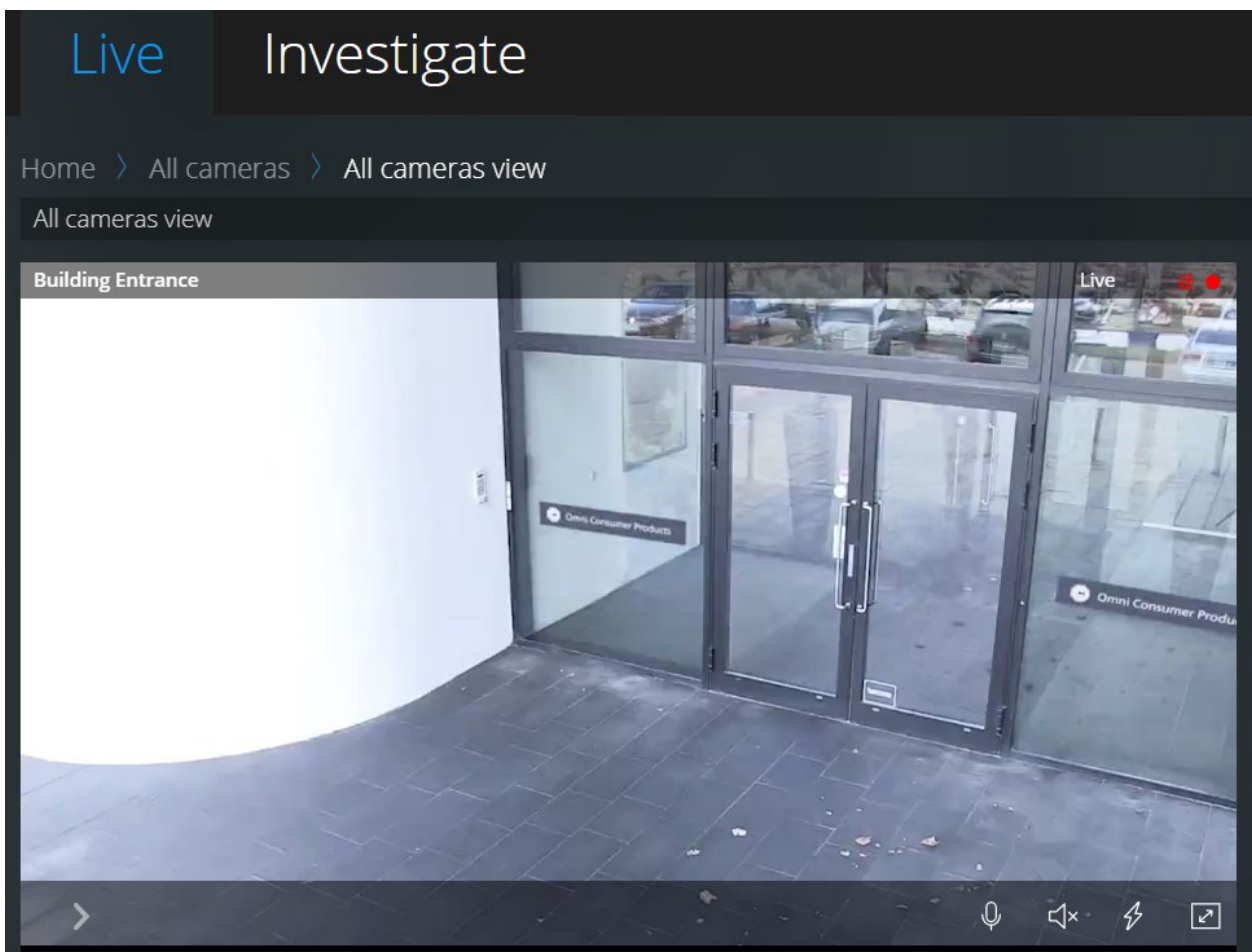

På fanen Live:

1. Find og klik på et kamera, som har en mikrofon tilsluttet.
2. På kameraets værktøjslinje skal du klikke på  for at starte med at afspille lyd.


Som standard er lyden slået fra.

Alle kameraer på striben med miniaturebilleder har et lydikon  i deres titellinje, hvis kameraerne har mikrofoner tilsluttet.






Du kan afspille modtaget live lyd fra mikrofoner tilknyttet kameraer, selv om der ikke er live video-streaming fra disse kameraer.

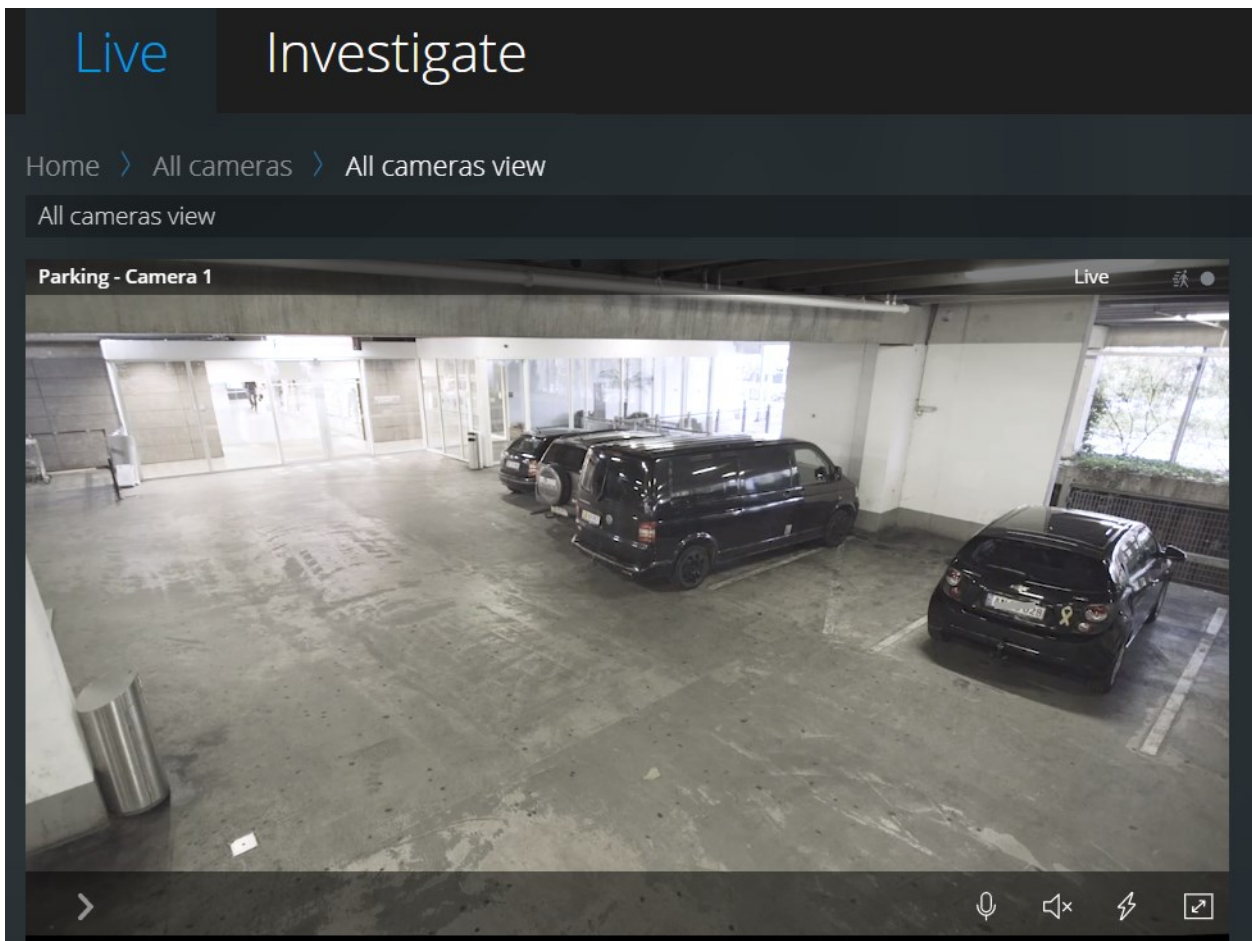Brug tryk-for-at-tale i live video fra et kamera




På fanen **Live**:




1. Find og klik på et kamera, der har en højttaler.
2. På kameraets værktøjslinje skal du klikke og holde på  for at starte med at bruge tryk-for-at-tale.
3. Giv slip på , når du vil holde op med at sende lyd.

Alle kameraer på striben med miniaturebilleder har et tryk-for-at-tale-ikon  på deres værktøjslinje, hvis kameraet har højttalere.

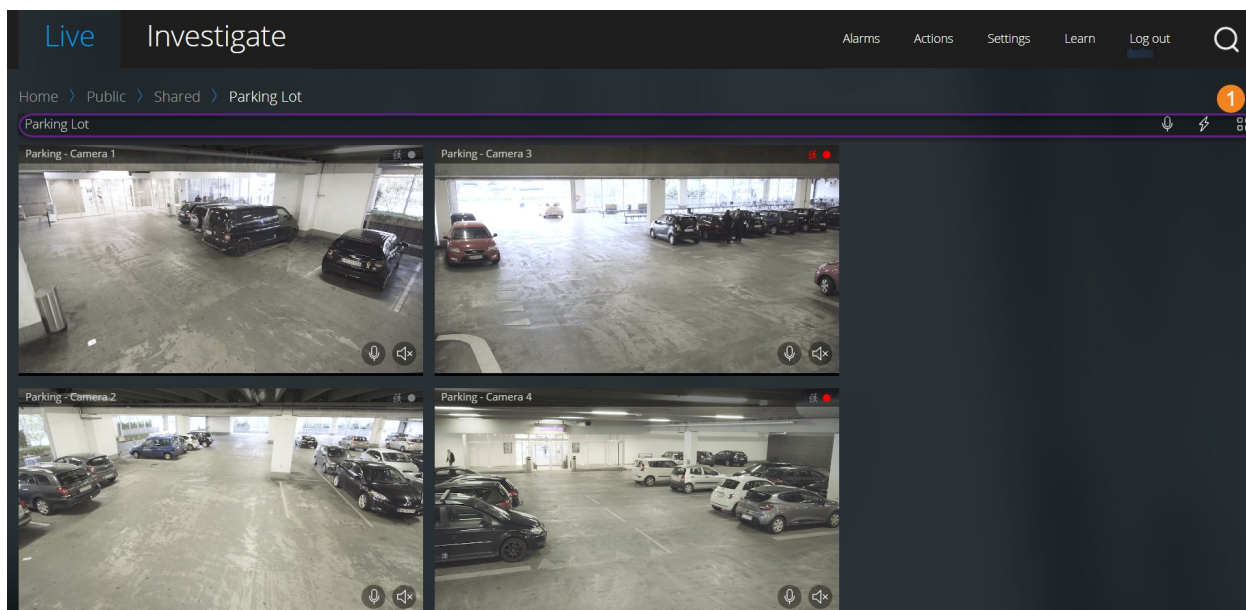Broadcast lyd til flere kameraer i live video



På fanen Live:


1. Vælg en visning.
2. På visningens værktøjslinje  skal du klikke og holde  for at starte med at broadcaste lyd til alle de kameraer i visningen, som har højttalere.
3. Giv slip på  når du vil holde op med at broadcaste lyd.

Afspil optagelser fra et kamera




"Jeg har netop lagt mærke til noget på Camera 1. Jeg vil afbryde live video midlertidigt og tage et kig på, hvad der skete."



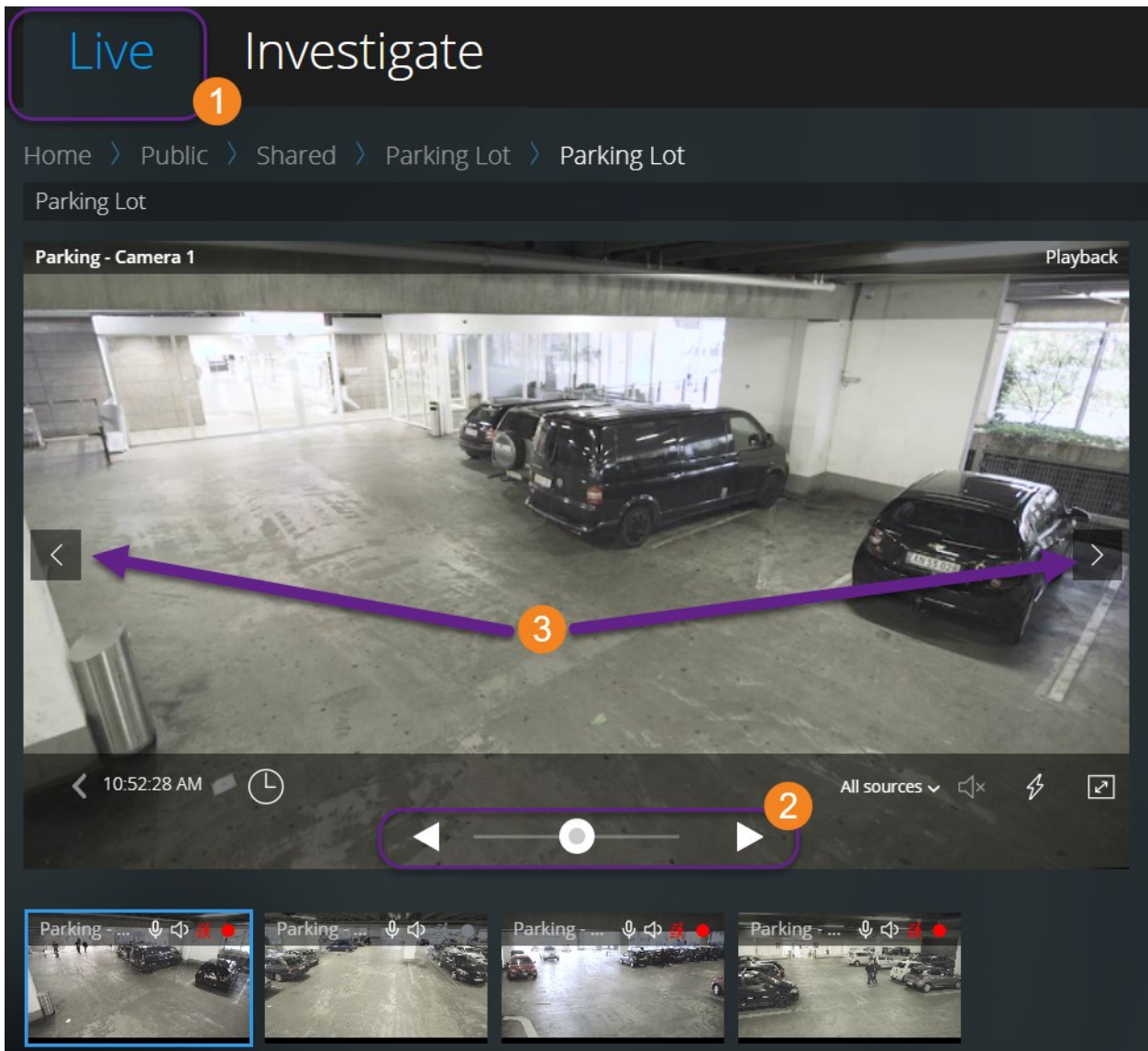





Du kan afspille en optagelse fra et kamera på både **Live** -fanen og **Efterforsk** -fanen.



På fanebladet **Live** ❶:

1. Find og klik på et kamera.
2. På kameraets værktøjslinje skal du klikke på  for at sætte videoen på pause.
Linjen med afspilningsknapper bliver vist.







På linjen med afspilningsknapper ❷:

Element	Hvad kan det bruges til?
	Træk mod venstre for at gå hurtigt bagud i tiden eller mod højre for at gå hurtigt frem i tiden. Når skyderen er placeret i midten, er afspilningshastigheden som standard normal.
	Afspil videoen baglæns eller fremad.
	Se det forrige eller det næste billede  .
	Klik for at åbne tidsvælgeren > Angiv en dato og et tidspunkt for at afspille videoen.
	Se hvornår optagelsen blev lavet.
	Start eller stop afspilning af lyd med video-optagelsen (se Krav for at lytte til modtaget lyd på side 6).
	Vælg den lydklide, du ønsker at lytte til, når video-optagelsen er med tovejslyd (se Krav til brug af tryk-for-at-tale på side 6 , Afspil lyd i videooptagelser (forklaret) på side 27).



På fanen **Efterforsk**:

Hvis du vil afspille en optagelse fra et kamera, men har mere end et kamera i den valgte gruppe, så kan du fjerne de ikke-ønskede kameraer. For at gøre dette skal du følge trinene i [Fjern unødvendige kameraer fra videoafspilning på side 33](#).

Afspil optagelser fra et kamera:

1. På kameraets tidslinje skal du angive tidspunktet for videoafspilningen.
2. Klik  eller  for at afspille videoen baglæns eller frem.
3. Valgfrit. Klik på  for at starte eller på  for at stoppe afspilning af modtaget lyd, når du afspiller videooptagelsen forlæns ved normal hastighed (for kameraer, der har tilknyttet mikrofoner).
4. Valgfrit. Klik på  for at starte eller på  for at stoppe afspilning af lyd (for kameraer, som har tilknyttet mikrofoner og højttalere). Vælg den lydklide, du ønsker at lytte til, når video-optagelsen er med tovejslyd (se [Afspil lyd i videooptagelser \(forklaret\) på side 27](#)).




For at få en større visning skal du pege på det kamera, du ønsker at udvide og klikke på  oppe til højre eller klikke på selve miniaturevisningen for kameraet. Tryk **Esc** eller klik på  oppe til højre for at vende tilbage til standardvisningen.

Afspil lyd i videooptagelser (forklaret)


I XProtect Web Client kan du:


- Afspille lyd fra kameraoptagelser i live-tilstand
- Afspille lyd fra kameraoptagelser i efterforskningstilstand

På kameraets værktøjslinje kan man gøre dette:

- For at lytte til optaget modtaget lyd kan du klikke på  for at starte afspilning af lyden, mens du afspiller video-optagelsen




- For at lytte til optaget modtaget lyd og udgående lyd kan du klikke på  for at starte afspilning af lyden. Fra listen **Lydkilde** kan du vælge den lydenhed, du ønsker at lytte til mens du afspiller videooptagelsen. Mulighederne er:
 - **Alle kilder** (standard) - lyt til både optaget modtaget og udgående lyd
 - **Mikrofon** - lyt kun til modtaget lyd
 - **Højtaler** - lyt kun til udgående lyd

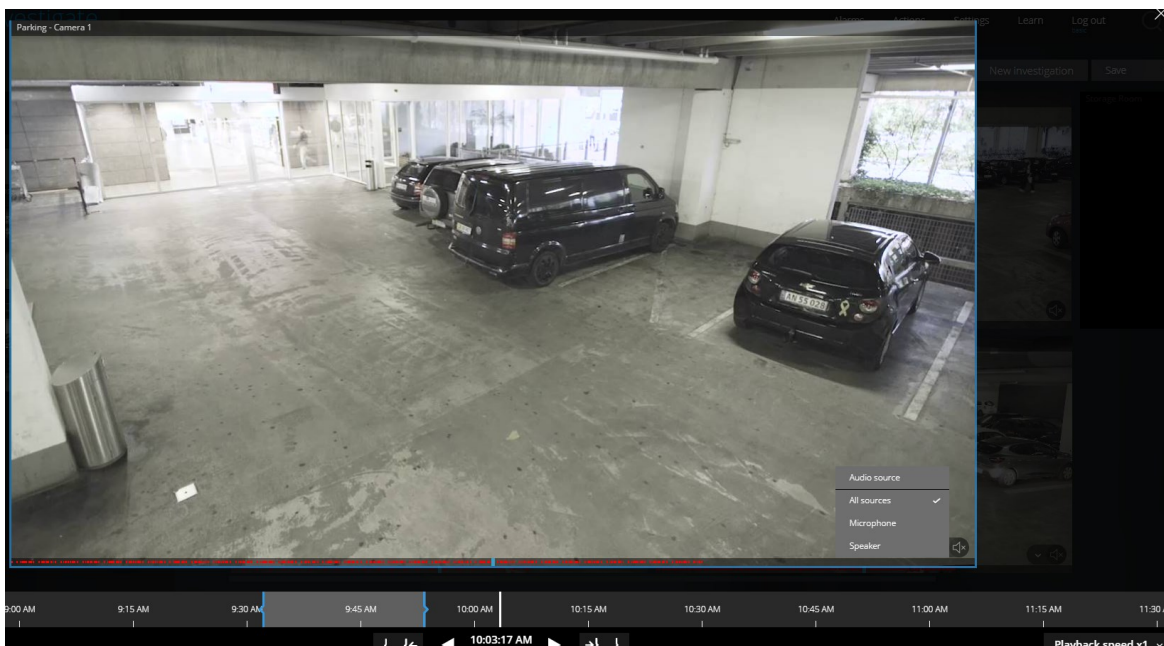


Du kan kun afspille lyd, når der er en video-optagelse, og du afspiller optagelsen fremad og i normal hastighed.


Optagelser fra flere kameraer (forklaret)

På fanen **Efterforsk** kan du afspille optagelser uden at oprette en efterforskning.

Nederst i vinduet med kameravisningen angiver et rødt linje  de tidsrum, hvor du kan finde videooptagelser.

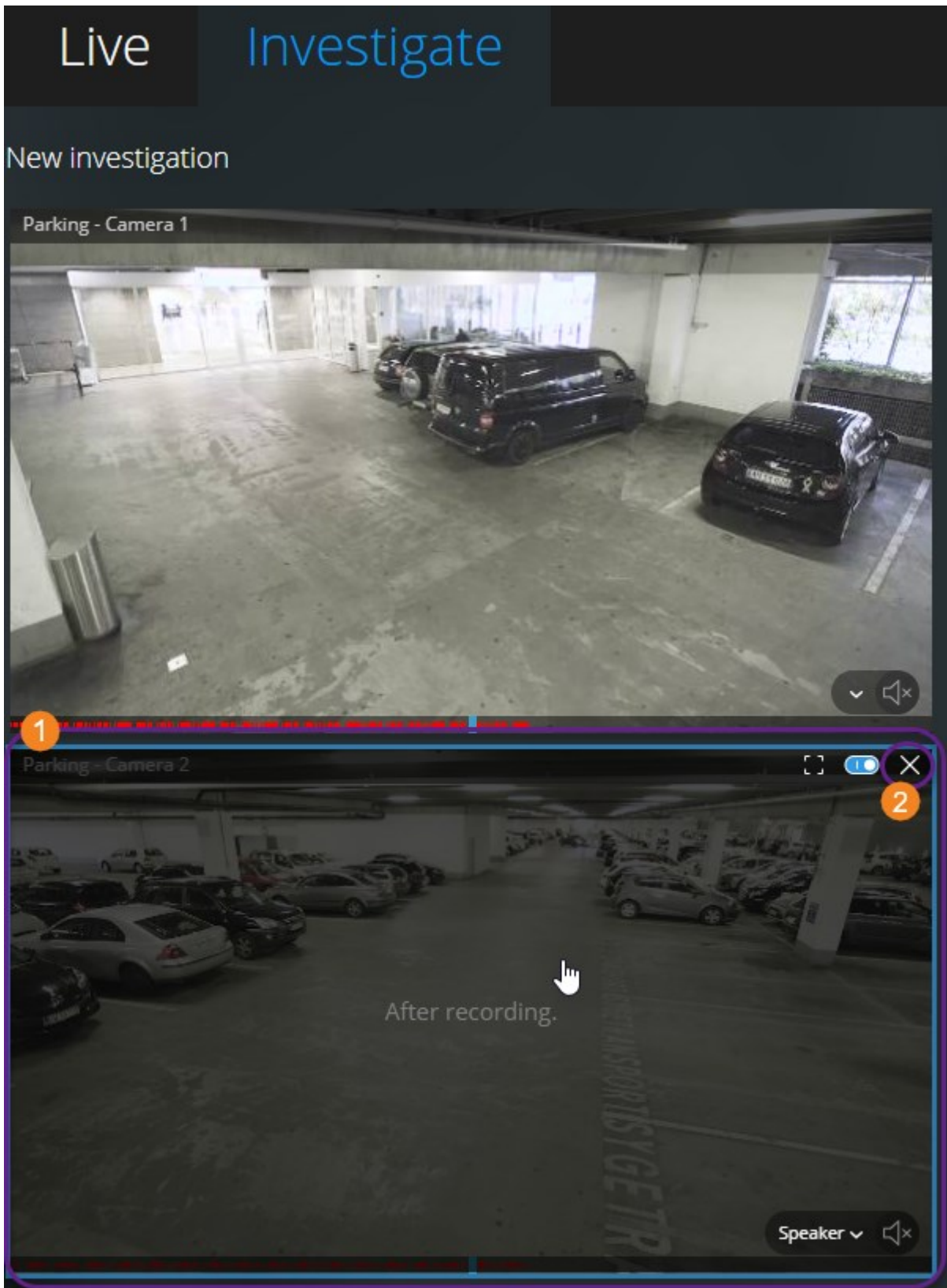

I denne tilstand kan du:

- Vælg de kameraer, du ønsker afspilning fra og fjern dem, der ikke har optagelser fra det angivne tidspunkt  (se [Fjern unødvendige kameraer fra videoafspilning på side 33](#))
- Angiv tidspunktet for de optagelser, du ønsker at afspille (se [Angiv tidspunkt for videoafspilning på side 30](#))
- Angiv tidspunktet for optagelserne (se [Brug efterforskningstidslinjen \(forklaret\) på side 34](#))
- Afspille optagelserne fra alle kameraer i den valgte kameragruppe på samme tid
- Starte eller stoppe afspilning af lyd med video-optagelsen fra et bestemt kamera i den valgte kameragruppe (se [Afspil lyd i videoptagelser \(forklaret\) på side 27](#))


Angiv tidspunkt for videoafspilning




"Jeg skal tilbage til et bestemt tidspunkt og se optagelser fra det tidspunkt."


For at afspille video fra et bestemt tidspunkt skal du bruge tidsvælgeren. Du kan finde tidsvælgeren både på fanen **Live** og på fanen **Efterforsk**.

På fanen **Live**:

1. Find og klik på et kamera.
2. På kameraets værktøjslinje skal du klikke på  for at sætte videoen på pause.


Linjen med afspilningsknapper bliver vist.


3. På linjen med afspilningsknapper skal du klikke på  for at åbne tidsvælgeren.

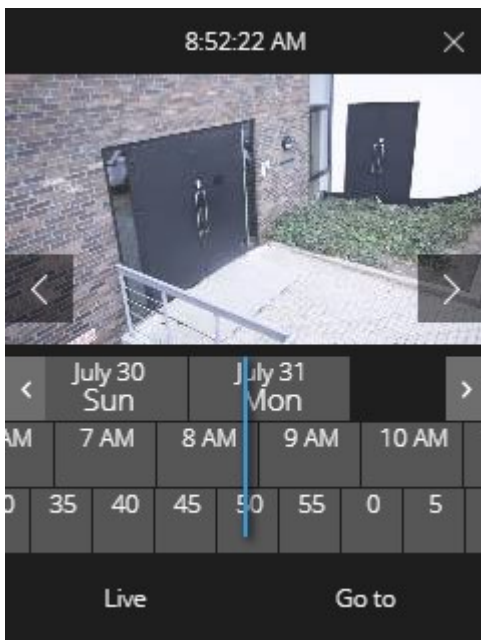


På fanen **Efterforsk**:

1. På tidslinjen skal du klikke på  for at åbne tidsvælgeren.

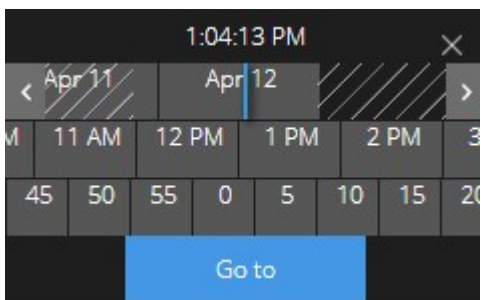


 Du kan klikke og trække tidsvælgeren for at ændre dens placering på skærmen.

Element	Hvad kan det bruges til?
	Se forrige eller næste billede (Kun for tidsvælgeren på Live -fanen).

Element	Hvad kan det bruges til?
	Gå en uge bagud eller frem.
	For at angive dagen kan du trække skyderen for dage til venstre eller højre. Den blå tidsindikator viser den valgte dato.
	For at angive timen kan du trække skyderen for timer til venstre eller højre. Den blå tidsindikator viser den valgte time.
	For at angive minuttet kan du trække skyderen for minutter til venstre eller højre. Den blå tidsindikator viser det valgte minut.
Gå til	Klik for at afspille videoen fra det angive tidspunkt og frem.
Live	Klik for at vende tilbage til live video (Kun for tidsvælgeren på fanen Efterforsk).

Slå afspilning til eller fra

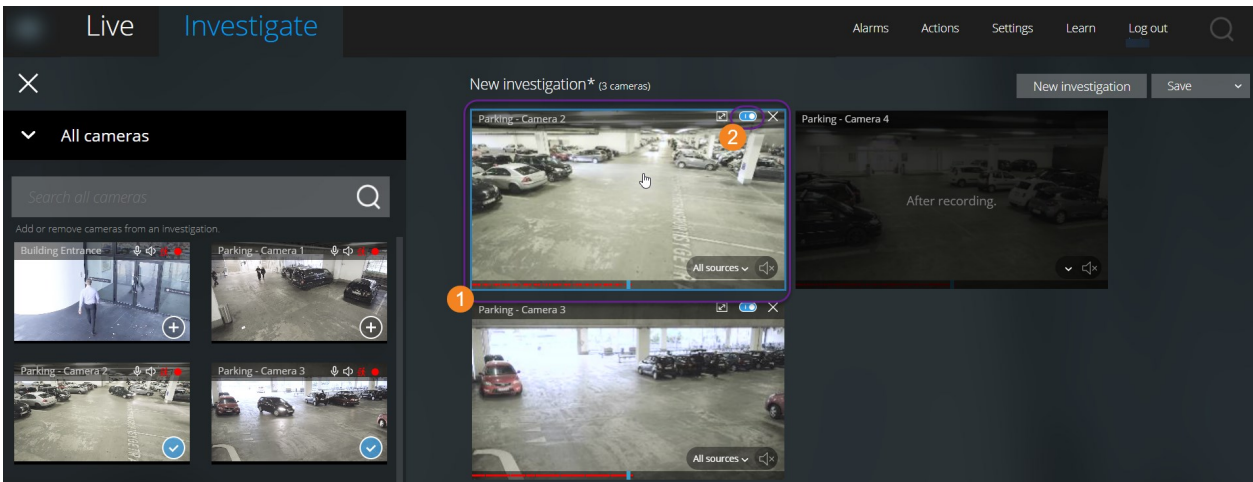


I en efterforskning på fanen **Efterforsk**:

1. Placer markøren på det kamera **1**, som du vil aktivere eller deaktivere afspilning for.
2. Oppe til højre i videoen **2** skal du klikke på  for at slå afspilning til eller fra.

Fjern unødvendige kameraer fra videoafspilning



"Før jeg afspiller videoen, vil jeg fjerne de kameraer, der ikke indeholder nogen optagelser fra det tidsinterval, jeg har angivet. Hvordan gør jeg det?"

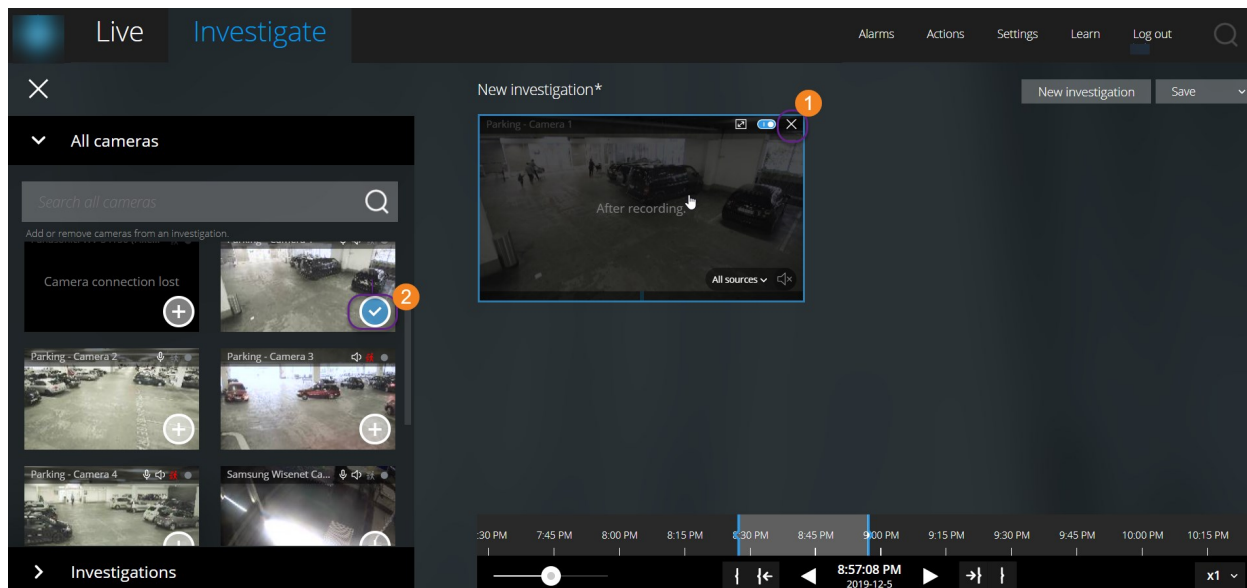

På fanen **Efterforsk** kan du fjerne unødvendige kameraer fra en kameragruppe:

- Peg på kameraet **1** og klik så på  oppe til højre
- På sidepanelet skal du klikke på 
- På sidepanelet skal du dobbeltklikke på det kamera, du ønsker at fjerne

Kameraer i dit efterforskningsområde (forklaret)

Når du ser en gruppe kameraer i live-tilstand og så skifter til efterforsknings-tilstand, vil den samme gruppe kameraer vise sig i dit efterforskningsområde.



På fanen **Efterforsk** kan du se hvert enkelt kamera i visningen eller gruppen. De dupliserede kameraer bliver ikke vist i dit efterforskningsområde.

Eksempler:

- Du er i din **Private** mappe på fanen **Live**. Når du klikker på fanen **Efterforsk**, vil alle kameraer i mappen **Privat** blive vist i dit efterforskningsområde
- Du er på **Start** -siden på fanen **Live**. Når du klikker på fanen **Efterforsk**, vil alle kameraer i dit system blive vist i dit efterforskningsområde.


For at starte afspilning af modtaget og udgående lyd i en efterforskning, du har oprettet, skal du:

- Tilføj kameraer, som har tilknyttede lydenheder (mikrofoner og højttalere) (se [Krav for at lytte til modtaget lyd på side 6](#) og [Krav til brug af tryk-for-at-tale på side 6](#))
- Afspil video-optagelserne forlæns ved normal hastighed (se [Afspil lyd i videooptagelser \(forklaret\) på side 27](#))

Brug efterforskningstidslinjen (forklaret)

På tidslinjen i en efterforskning kan du angive:


- Tidspunktet for den optagelse, du vil efterforske
- Et tidsinterval for din efterforskning

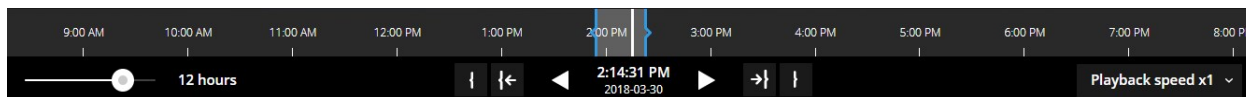

Element	Hvad kan det bruges til?
	For at ændre tidspunktet for optagelsen skal du trække tidslinjen til venstre eller højre. Den hvide tidsindikator midt på tidslinjen viser det valgte tidspunkt.
	Afspil videoen baglæns eller fremad.
	<ul style="list-style-type: none"> • Se hvornår optagelsen blev lavet • Klik på dette område i tidslinjen for at åbne tidsvælgeren. Du kan bruge tidsvælgeren til at vælge tidspunktet for den optagelse, du ønsker at efterforske eller downloade (se Angiv tidspunkt for videoafspilning på side 30) <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p> Du kan klikke og trække tidsvælgeren for at ændre dens placering på skærmen.</p> </div>

Element	Hvad kan det bruges til?
	Klik og træk de blå tidsintervalmarkører for at angive start- og sluttid for den optagelse, du vil efterforske eller downloade.
	Afstem start- eller sluttidspunktet for din efterforskning med det valgte tidspunkt.
	Afstem det valgte tidspunkt med start- eller sluttidspunktet for din efterforskning.
	Nede til højre på tidslinjen skal du vælge en bestemt hastighed for afspilningen af video fra listen Afspilningshastighed . Standardværdien er x1 .
	Nede til venstre på tidslinjen skal du trække i skyderen for at ændre tidsintervallet. Med denne indstilling kan du definere et præcist tidsinterval for afspilning eller download af videoen.

Opret efterforskninger fra et eller flere kameraer



"Jeg skal efterforske optagelser fra alle kameraerne på vores kontor fra omkring klokken 9:30 i går morges, og jeg vil beholde optagelserne i en måned."


Du skal oprette en efterforskning når:

- Du ønsker at gemme video-optagelser længere end opbevaringstiden, så du kan afspille optagelserne så meget du vil, selv om de allerede er blevet slettet fra systemets database



Som standard er opbevaringstiden for video-optagelser i systemdatabasen syv dage. Hvis den er aktiveret, er opbevaringstiden for efterforskninger i mobilserveren som standard også syv dage (se [Opbevaringstid og lagring af optagelser og efterforskninger \(forklaret\)](#) på side 11).

- Du ønsker at eksportere, downloade og dele optagelserne med myndighederne på et senere tidspunkt

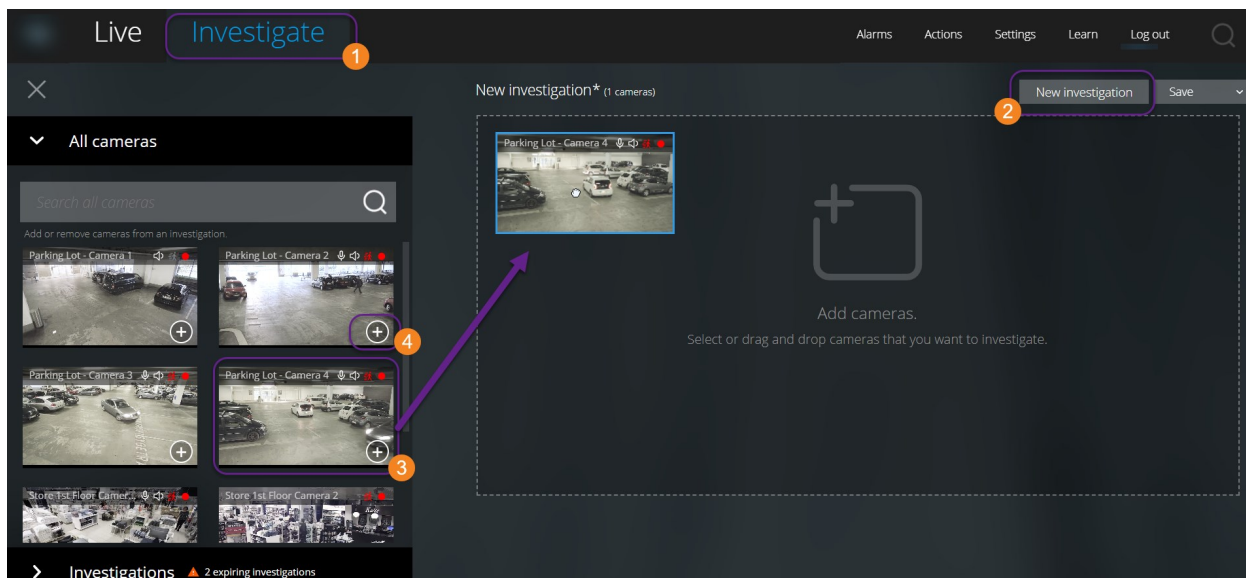


På fanebladet **Efterforsk** 1:

1. Klik på **Ny efterforskning** 2.

Der bliver åbnet et sidepanel til venstre.

2. I sidepanelet, under **Alle kameraer**, kan du søge efter kameraer, du ønsker at efterforske.

3. Du kan tilføje et eller flere kameraer, hvis du:

- Klik, træk og slip det eller de kameraer 3 du ønsker at efterforske i området **Ny efterforskning**
- Klik på  nede til højre på hvert kamera 4, du ønsker at tilføje

4. Dobbeltklik på det kamera, du ønsker at tilføje

Du kan føje op til 18 kameraer til en efterforskning. Hvis visningen med kameraer, du ønsker at efterforske, indeholder flere kameraer, har du to muligheder:



- Vælg **Tilføj kameraer** for at føje de første 18 kameraer til din efterforskning
- Vælg **Åbn tom efterforskning** for at bestemme, hvilke kameraer, der skal føjes til din efterforskning

5. Brug tidsvælgeren til at angive tidspunktet for den optagelse, du vil efterforske.

Det valgte tidspunkt gælder for alle kameraer, du har føjet til din nye efterforskning (se [Angiv tidspunkt for videoafspilning på side 30](#)).

6. Brug tidslinjen til at angive tidsintervallet for den optagelse, du vil afspille.

Det valgte tidspunkt gælder for alle kameraer, du har føjet til din nye efterforskning (se [Brug efterforskningstidslinjen \(forklaret\) på side 34](#)).

7. Fra listen **Gem** skal du vælge **Gem som**.



Formularen **Gem din efterforskning** åbner.

8. I feltet **Efterforskningsnavn** angiv et navn for din nye efterforskning.

9. Klik på **OK**.

Den nye efterforskningskonfiguration gemmes.




For at få en større visning skal du pege på det kamera, du ønsker at udvide og klikke på  oppe til højre eller klikke på selve miniaturevisningen for kameraet. Tryk **Esc** eller klik på  oppe til højre for at vende tilbage til standardvisningen.


Føj et kamera til en eksisterende efterforskning




"Jeg vil føje flere kameraer til en eksisterende efterforskning. Hvordan gør jeg det?"


På fanen **Efterforsk** skal du klikke på  for at åbne sidepanelet.


1. I sidepanelet skal du klikke på **Efterforskninger**.
2. Naviger til den efterforskning, du ønsker at føje flere kameraer til, og klik på efterforskningens navn.
3. I sidepanelet skal du klikke på **Alle kameraer**. Alle tilgængelige kameraer bliver vist som miniaturebilleder i området **Alle kameraer**.

4. Naviger til det kamera, du ønsker at tilføje, og:
 - Klik, træk og slip kameraet **1** i efterforskningsområdet
 - Klik på  nede til højre i hvert kamera **2**
 - Dobbeltklik på det kamera, du ønsker at tilføje

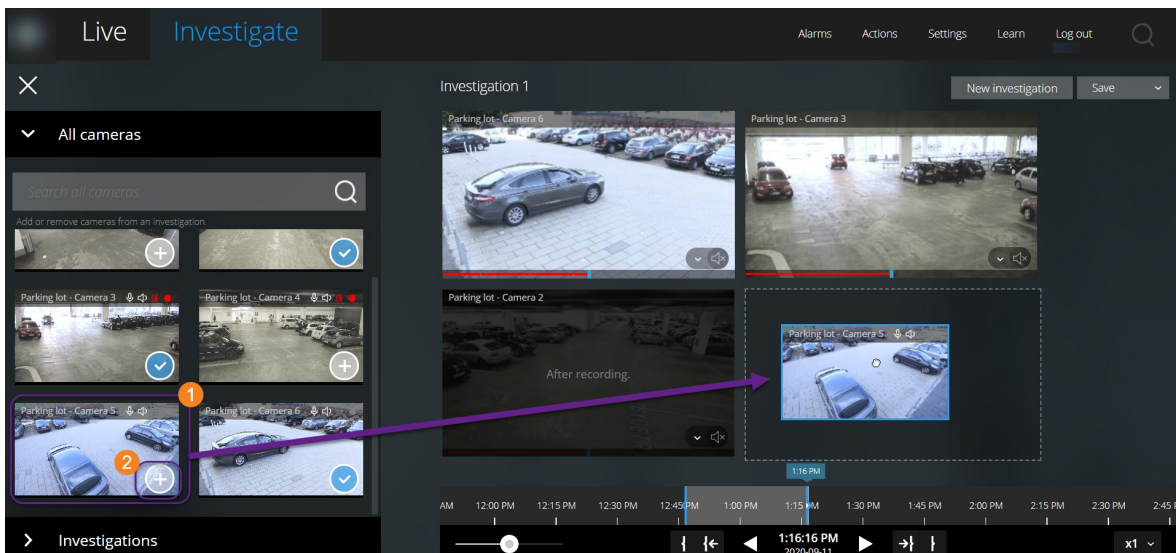


1. (Valgfrit) For at ændre på kameraernes rækkefølge i efterforskningen skal du klikke, trække og slippe det kamera, du ønsker at flytte.

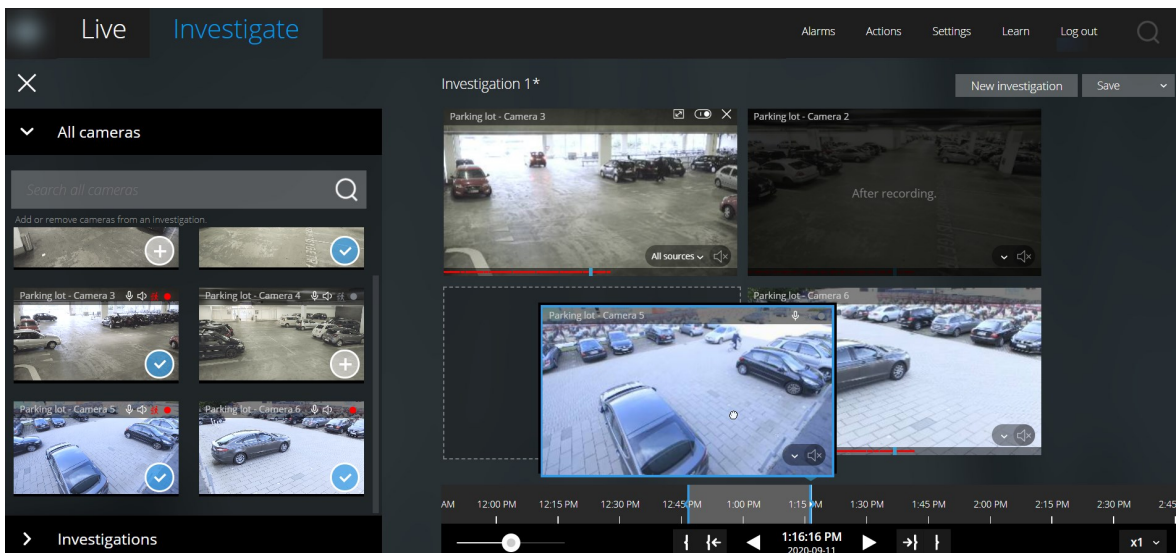

 Du kan søge efter et bestemt kamera via dets navn i feltet **Søg** i alle kameraer.




Hvis afkrydsningsfeltet nede til højre er markeret , er kameraet allerede blevet tilføjet.

5. Klik på **Gem**.
6. I rullelisten skal du vælge **Gem**.


Fjern et kamera fra eksisterende efterforskning



"Jeg er ved at downloade disse videoer, men på Kamera 1 er der ikke nogen relevante optagelser. Hvordan fjerner jeg det fra min efterforskning?"

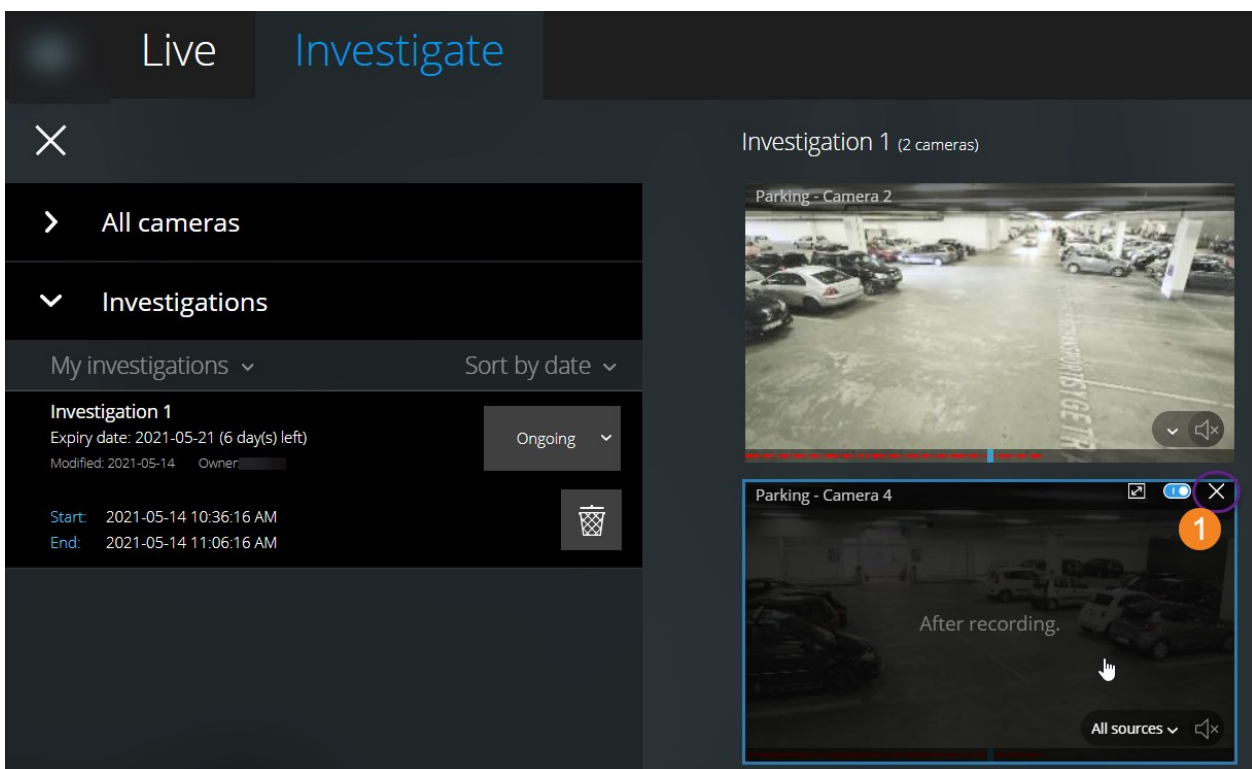

Gør følgende på fanen **Efterforsk** i en eksisterende efterforskning:


1. Peg på kameraet, du ønsker at fjerne fra efterforskningen.
2. Klik på  oppe til højre **1** for at fjerne kameraet fra efterforskningen.
3. Klik på **Gem**.
4. I rullelisten skal du vælge **Gem**.


Du kan også fjerne et kamera fra din efterforskning ved at åbne kameragruppervisningen under **Alle kameraer** (se [Fjern unødvendige kameraer fra videoafspilning på side 33](#)).

Opdater eller slet din efterforskning





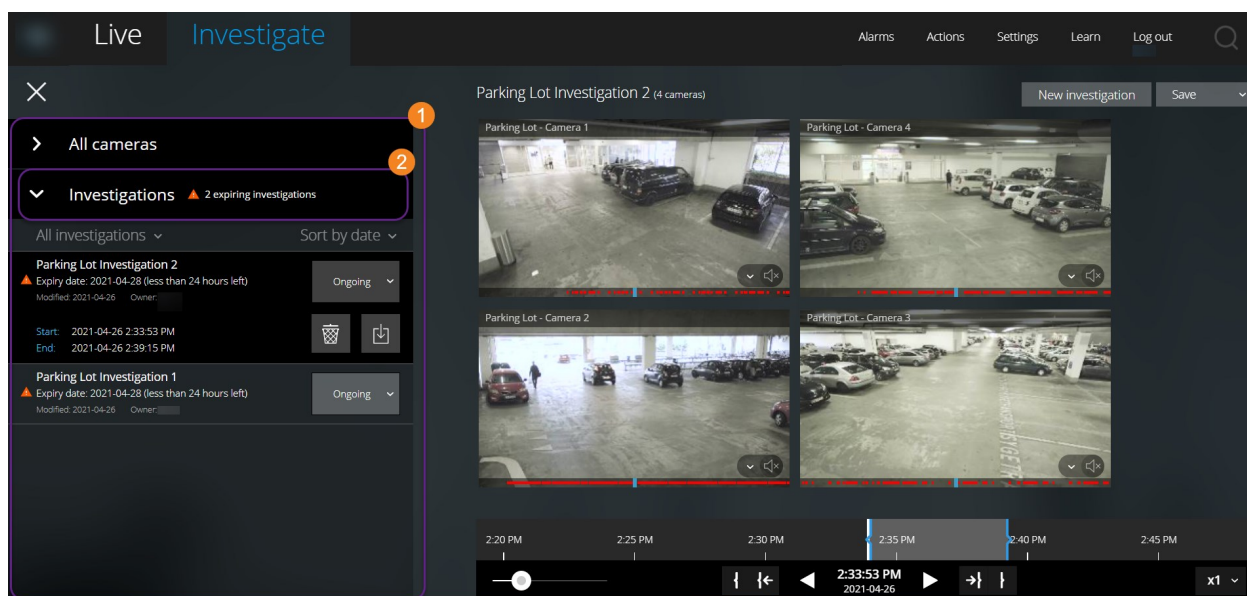

"Jeg vil opdatere navnet og tilstanden for en eksisterende efterforskning og slette en anden efterforskning. Hvordan gør jeg det?"



På fanen **Efterforsk** skal du klikke på  for at åbne sidepanelet.

I sidepanelet **1**:

1. Klik på **Efterforskninger** **2** for at se alle dine efterforskninger.
2. I listen **Mine efterforskninger** skal du navigere til og klikke på efterforskningen, du vil opdatere eller slette.

Element	Hvad kan det bruges til?
[efterforskningsnavn]	Klik for at redigere navnet på den eksisterende efterforskning.
Udløbsdato	Se udløbsdatoen for efterforskningen, når opbevaringstid for efterforskninger er aktiveret.
	Slet efterforskningen.
	Forbered og download efterforskninger i et valgt videoformat (se Forbered eksport og download af video på side 41).
	Du skal manuelt sætte din efterforskningstilstand til Igangværende eller Fuldført .
	Sorter dine efterforskninger efter: <ul style="list-style-type: none"> • Dato. Se dine nyeste efterforskninger øverst i listen • Tilstand. Se dine igangværende efterforskninger først og dine fuldførte efterforskninger sidst i din liste



Når du åbner en efterforskning og erstatter en lydenhed, der er tilknyttet et kamera, som allerede er indeholdt i efterforskningen, vil systemet afspille lyd fra den tidligere tilknyttede lydenhed. For at gennemføre opdateringen og begynde at afspille lyden fra den nye lydenhed skal du først genstarte XProtect Web Client, og derpå skal du klikke på **Gem** for at opdatere denne efterforskning (Kun for kameraer, der har mikrofoner eller højttalere tilknyttet).

Forbered eksport og download af video






"Jeg vil downloade min efterforskning og vise den til sikkerhedschefen senere. Hvordan gør jeg det?"



Du skal have de nødvendige brugerrettigheder for at kunne forberede en videoeksport og downloade video. Du skal følge dit firmas regler, når du deler videobevismateriale.

På fanen **Efterforsk**:

1. Klik på .
2. Åbn dine **Efterforskninger**.
3. Klik på den efterforskning, du vil downloade.
4. Klik på .
5. (Valgfrit) For at forberede en videoeksportpakke, der indeholder lyd, skal du markere afkrydsningsfeltet **Inkluder lyd i pakken**. Som standard er markeringen fjernet fra dette felt.
6. (Valgfrit) For at kryptere din videoeksportpakke skal du markere afkrydsningsfeltet **Krypter med adgangskode**. Som standard er markeringen fjernet fra dette felt.

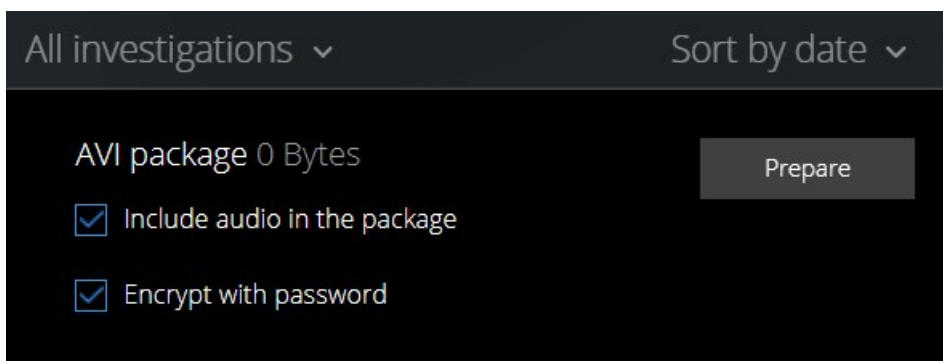


7. Klik på **Forbered** for at downloade videoen i det format, du skal bruge.



Du kan forberede en videoeksport og downloade den senere. I den forberedte eksport kan antallet af videooptagelser være forskelligt fra antallet af kameraer, som du har føjet til efterforskningen. Forklaringen er, at nogle af kameraerne måske ikke har eksisterende optagelser inden for det tidsinterval, du har angivet.

8. (Valgfrit) I dialogboksen skal du oprette en adgangskode til kryptering af eksporten og klikke på **Indstil**. Adgangskoden bliver kun brugt på den aktuelle pakke-eksport.


9. Klik **Download** ¹ for at downloade den forberedte videoeksport. Du kan finde dine downloadede filer i din webbrowsers download-mappe.

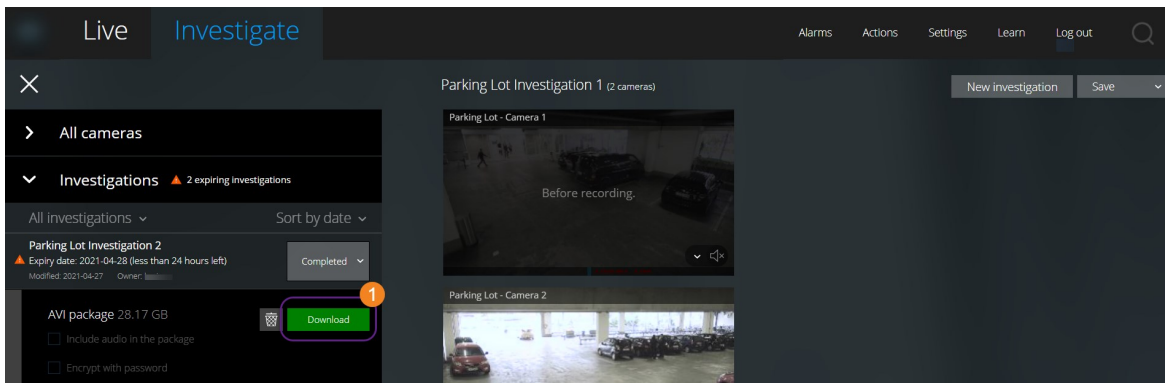


De tilgængelige videoformater er:

Format	Beskrivelse
AVI-pakke	Standard-filformatet, som er understøttet af de fleste medieafspillere. Vælg dette, hvis du er i tvivl.
XProtect-pakke	Du kan kun se XProtect-formatet med XProtect Smart Client – Player.
MKV-pakke	Det optagende kamera vælger, hvilken codec der bliver brugt. Du kan kun afspille videoen, hvis du har de nødvendige codecs installeret.

Del en XProtect Web Client-side (forklaret)





"Min kollega sidder i et andet kontor. Hvordan kan jeg hurtigst vise hende, præcis hvad jeg kigger på i min XProtect Web Client?"

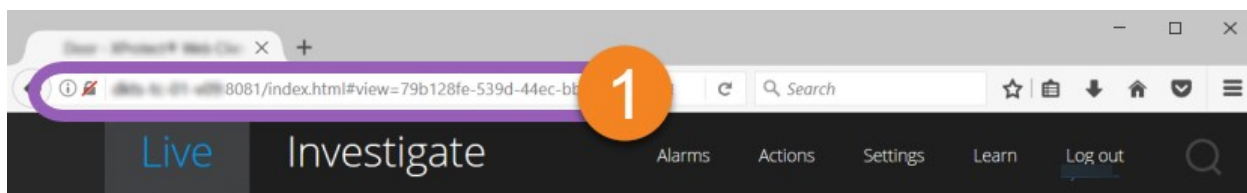

Hver side på din XProtect Web Client har sin egen internetadresse **1**. Du kan dele adressen med andre brugere. Når brugere åbner adressen i en webbrowser og logger på, kan de se den side, du delte med dem.

Se alarmer

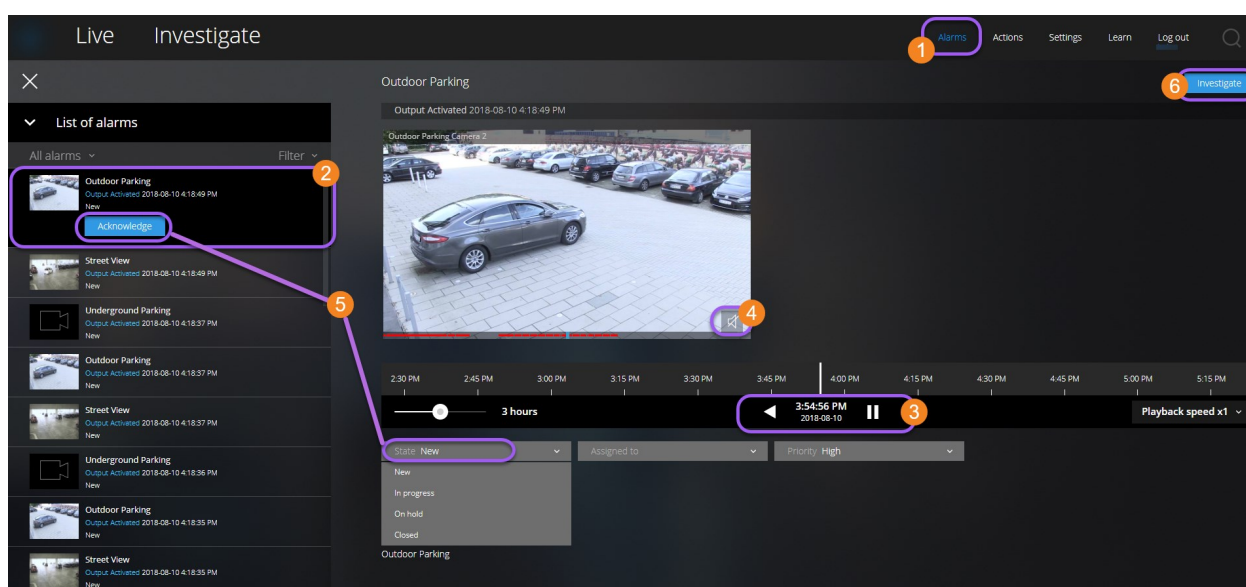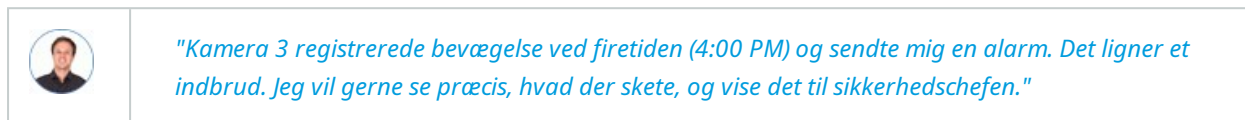

På fanen **Alarmer** **1**:

1. Find og klik på alarmen **2** du ønsker at se video fra. Fra listen **Filter** kan du filtrere alarmerne ud fra tilstande og prioritet.
2. Afspil videoen baglæns eller fremad, og se hvornår billedet, du ser, blev taget **3**.
3. Start eller stop med at afspille lyd ved afspilning af video ved normal hastighed **4** (se [Afspil lyd i videooptagelser \(forklaret\) på side 27](#)).
4. Skift tilstand for alarmen ved at klikke på knappen **Accepter** eller ved at vælge en anden alarmtilstand fra listen **5**.
5. For at gemme videoen til senere brug eller for at dele den med andre skal du klikke på **Efterforsk** **6**.
6. Følg trinene i [Forbered eksport og download af video på side 41](#).

Hvad kan ellers udløse alarmer?

- Et kamera, der holder op med at virke
- En glastrude, der bliver knust eller ødelagt
- Indbrud i et aflåst skab
- En sortlistet nummerplade, der bliver registreret på et kamera




For at komme til at se alarmer, skal du bede din systemadministrator om at sætte alarmer op og give dig tilstrækkelige brugerrettigheder.

Aktiver handlinger



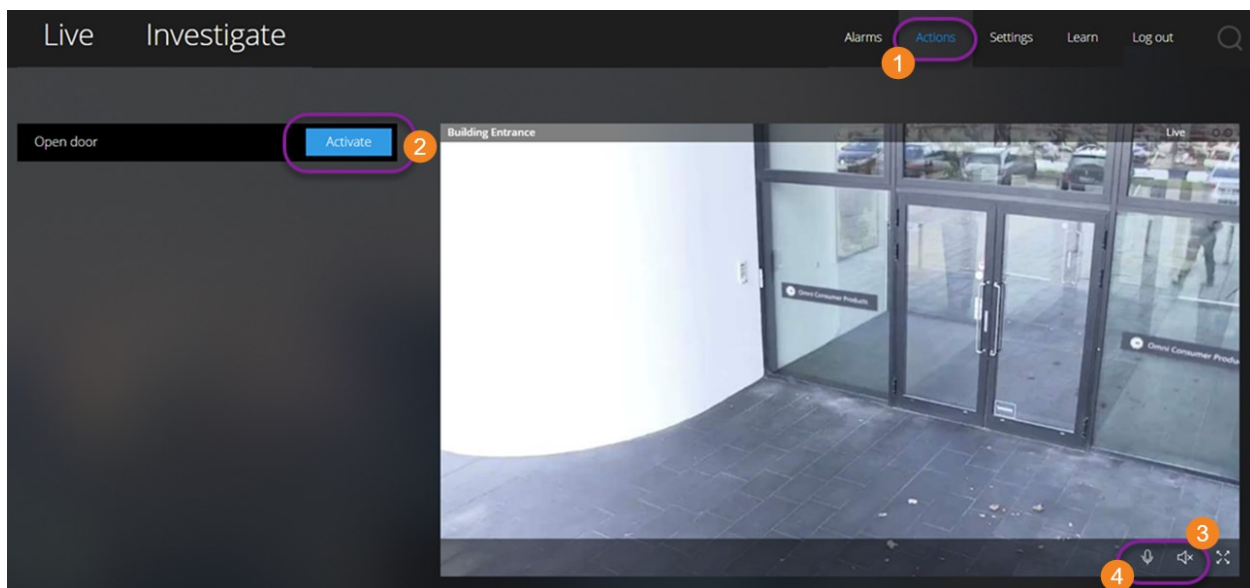


"Jeg vil kunne åbne hoveddøren for vores gæster ved bare at trykke på en knap."



Du kan aktivere handlinger, som udløser hændelser i dit videoovervågningssystem. Du kan for eksempel åbne hoveddøren (handling), og derved få kamera 3 til at optage video (hændelse).

På fanen **Handlinger** **1**:

1. Find den handling, du vil aktivere.
2. Klik på **Aktiver** **2**, og få for eksempel hoveddøren til at åbne.
3. Valgfrit. Start eller stop med at lytte til modtaget live lyd **3** (Kun for kameraer, der har mikrofoner).

4. Valgfrit. Klik og hold på  for at starte tryk-for-at-tale. Slip ikonet  for at holde op med at sende lyd  (Kun for kameraer, der har højttalere).

Du kan også aktivere handlinger på fanen **Live**, når du ser live video (se [Se live video \(forklaret\) på side 20](#)).

Hvad kan handlinger for eksempel være?

- At åbne og lukke døre
- At tænde og slukke lyset
- At aktivere og deaktivere sirener



For at komme til at se aktivere handlinger, skal du bede din systemadministrator om at sætte handlinger op og give dig tilstrækkelige brugerrettigheder.

PTZ-styring

Vælg, hvordan du vil bevæge dit PTZ-kamera ved at bruge musen.

Stryg:


1. Placer din markør over videoen.
2. Klik og hold venstre museknap nede.
3. Træk musen og giv så slip på den venstre museknap.


Tryk og hold nede:

1. Placer din markør over videoen.
2. Klik og hold venstre museknap nede.

Eller: Klik og træk din mus rundt.

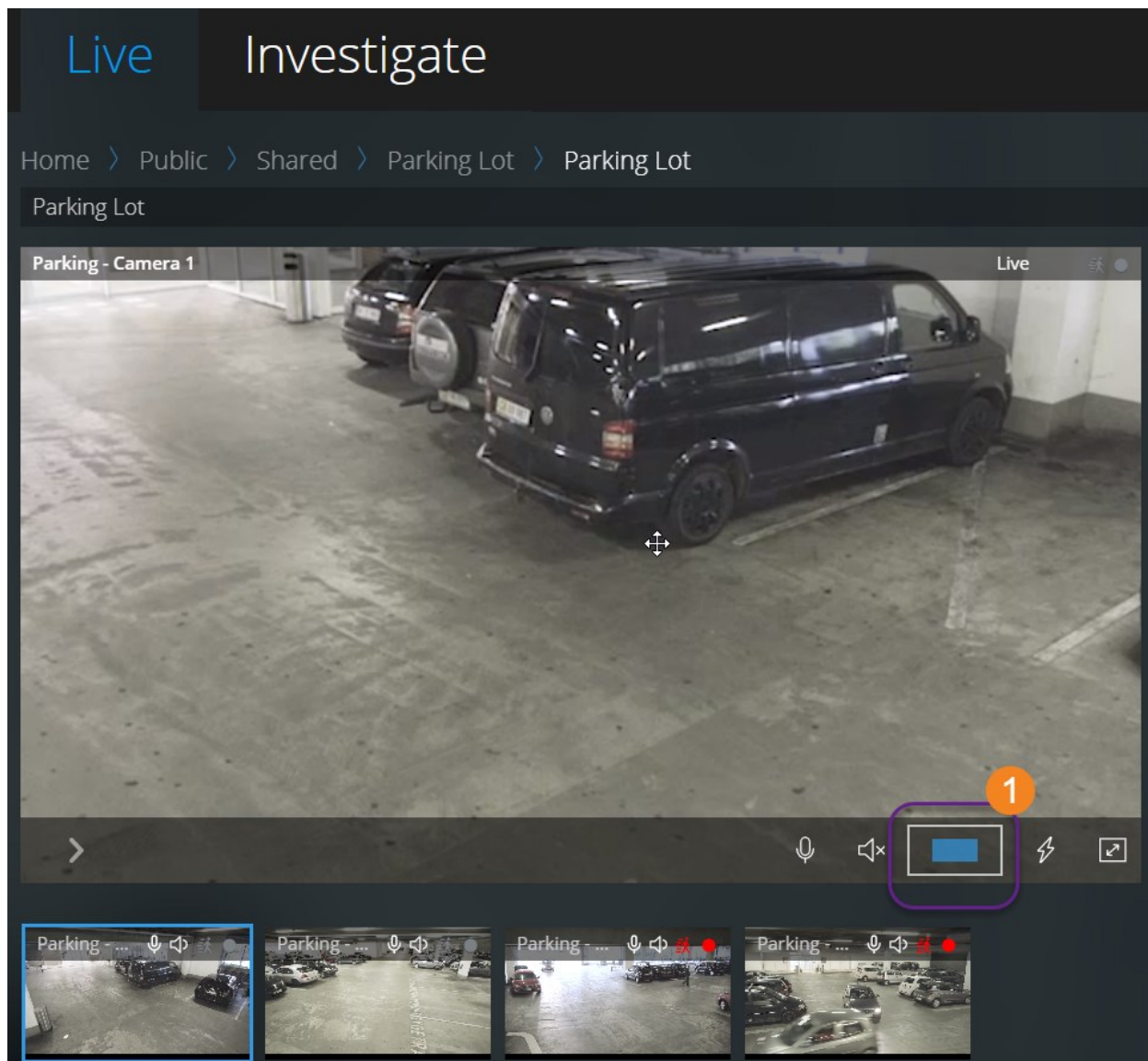

Brug digital zoom

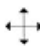

1. På fanebladet **Live** skal du finde et kamera og klikke på det.
2. Placer din markør over videoen.
3. Dobbeltklik og rul med musen for at zoome ind eller ud.
4. Når du har zoomet ind, kan du klikke og trække din -markør til det område, du er interesseret i. Zoom-område-indikatoren **1** hjælper til at navigere i den rigtige retning.

Brug optisk zoom (for kameraer, der understøtter optisk zoom)

1. På fanebladet **Live** skal du finde et PTZ-kamera og klikke på det.
2. Placer din markør over videoen.
3. Rul med musen for at zoome ind eller ud.

Eller: Klik på  og så på  for at zoome.



Hvis du bruger optisk zoom på dit kamera under optagelse, så vil de anvendte zoom-niveauer blive afspejlet i din optagelse.

Se hvordan du bevæger dit pan-tilt-zoom-kamera med musen i PTZ-styrings-sektionen (se [PTZ-styring på side 46](#)).

Opgrader

Opdater XProtect Web Client

For at bruge den seneste version af XProtect Web Client kan du spørge din systemadministrator om at opdatere XProtect Mobile Server-tjenesten.



helpfeedback@milestone.dk

Om Milestone

Milestone Systems er en førende leverandør af videoadministrationssoftware baseret på en åben platform; teknologi, som hjælper verden med at se, hvordan man sørger for sikkerhed, beskytter aktiver og øger virksomhedernes effektivitet. Milestone Systems understøtter et fællesskab baseret på en åben platform, som fremmer samarbejde og innovation inden for udvikling og anvendelse af netværksvideoteknologi med driftssikre og skalerbare løsninger, som findes på mere end 150.000 steder over hele verden. Milestone Systems blev grundlagt i 1998 og er en selvstændig virksomhed inden for Canon Group-koncernen. For yderligere oplysninger besøg <https://www.milestonesys.com/>.

